

このカタログに記載の商品は
介護保険制度対象商品です

福祉用具レンタル対象品・認知症老人徘徊感知器

介護保険を使用すれば、福祉用具を**1割**の負担額でレンタルにて
利用することができます。

詳しくはケアマネージャーか市町村担当福祉課にお問い合わせ
ください。

福祉用具情報システム(TAIS)登録一覧							
TAISコード	商品名	品番	掲載ページ	TAISコード	商品名	品番	掲載ページ
00021-000005	アクセスコール送信機	AC-T	5	00021-000083	ワイヤレス徘徊お知らせけいたいくん (卓上型受信機セット)	ACW-S(T)	8
00021-000078	ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん (卓上型受信機セット)	HS-W(T)	9	00021-000101	ワイヤレス徘徊お知らせけいたいくん (携帯型受信機セット)	ACW-S(KE)	8
00021-000096	ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん (携帯型受信機セット)	HS-W(KE)	9	00021-000085	ワイヤレス徘徊お知らせ感知くん (卓上型受信機セット)	HS-106(T)	10
00021-000079	ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくんワイド (卓上型受信機セット)	HS-W68(T)	9	00021-000103	ワイヤレス徘徊お知らせ感知くん (携帯型受信機セット)	HS-106(KE)	10
00021-000097	ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくんワイド (携帯型受信機セット)	HS-W68(KE)	9	00021-000077	卓上型受信機	HC-350	11
00021-000088	ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん (卓上型受信機セット)	HW-M48(T)	9	00021-000095	携帯型受信機	RXF-60K	11
00021-000099	ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん (携帯型受信機セット)	HW-M48(KE)	9	00021-000094	ベッドセンサー(一体型)	BX-BS3	13
00021-000107	ジャック付送信機(ワイヤレス送信機)	HC-116	9	00021-000032	マットセンサー	M-38	12
00021-000090	ワイヤレス起き上がりくん (卓上型受信機セット)	HW-BS3(T)	10	00021-000044	マットセンサー	M-68	12
00021-000100	ワイヤレス起き上がりくん (携帯型受信機セット)	HW-BS3(KE)	10	00021-000045	マットセンサー	M-458	12
00021-000062	ベッドセンサー(標準型)	BS-3	13	00021-000046	マットセンサー	M-4512	12
00021-000086	マットセンサ送信機	TX-M48	11	00021-000075	マットセンサー	MA-48	12
00021-000087	ベッドセンサ送信機	TX-BS3	11	00021-000104	マットセンサー	MA-610	12

ヘルスケア専用ホームページURL

http://www.hc.takeex-eng.co.jp/

竹中のセンサ
TAKEXのヘルスケア

製品検索 品番・キーワード

Home システム事例 製品情報 ダウンロード よくあるご質問 新着情報 会社情報 お問い合わせ・資料請求

センサ専門メーカーが
ご要望のヘルスケア機器をお届けします

お問い合わせ

ヘルスケア事業部

〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1

TEL (075) 593-3172(直通)

お問い合わせ 受付時間 平日 9:00～12:00 13:00～17:30

FAX (075) 583-5550

E-mail hcd@takeex-eng.co.jp

URL http://www.takeex-eng.co.jp/

■品質保証とアフターサービス■

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■

弊社の商品は、快適な生活をお手伝いするヘルスケア用機器で医療用機器、災害防止用機器、人身事故防止機器ではありません。ご使用上で万一発生した人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検・施工上の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサグループ

TAKEX

竹中エンジニアリング株式会社

ヘルスケア事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085

札幌営業所 〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9(大都ビル) TEL(011)281-4641(代) FAX(011)281-4642

仙台営業所 〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1(二日町東急ビル) TEL(022)268-2411(代) FAX(022)268-2413

郡山営業所 〒963-8041 郡山市富田町字坦ノ腰58-1(第2ヨコヤマビル) TEL(024)962-4310(代) FAX(024)962-4311

高崎営業所 〒370-0848 高崎市鶴見町1-1(丸三高崎ビル) TEL(027)327-3981(代) FAX(027)310-8577

さいたま営業所 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389(フジックス桜木町ビル) TEL(048)653-7531(代) FAX(048)653-7532

千葉営業所 〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14(FC千葉ビル) TEL(043)202-2551(代) FAX(043)202-2552

東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14(小倉ビル) TEL(03)5805-8081(代) FAX(03)5805-8082

立川営業所 〒190-0023 立川市栄崎町3-18-30(東財パステルメゾン立川) TEL(042)540-1665(代) FAX(042)540-1666

横浜営業所 〒220-0033 横浜市長北区新横浜3-24-5(ユニオンビルANEX) TEL(045)471-8467(代) FAX(045)475-2912

長野営業所 〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1(ヤマギシビル) TEL(026)229-8130(代) FAX(026)229-8133

静岡営業所 〒422-8062 静岡市駿河区福川3-1-25(ラ・リベルテK2F-B号) TEL(054)203-5220(代) FAX(054)203-5219

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千代区内山3-12-14(豊島不動産ビル) TEL(052)731-7227(代) FAX(052)731-7225

金沢営業所 〒920-0853 金沢市本町2-7-1(越田ビル) TEL(076)234-7201(代) FAX(076)234-2401

京都営業所 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)593-3171(代) FAX(075)591-5422

大阪営業所 〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17(アクティ南森町) TEL(06)6360-6881(代) FAX(06)6360-6882

神戸営業所 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11(芙蓉ビル東館) TEL(078)230-6112(代) FAX(078)230-6113

広島営業所 〒730-0013 広島市中区八丁堀1-2-22(楽地ビル) TEL(082)223-1138(代) FAX(082)223-1755

高松営業所 〒760-0007 高松市中央町1-26(藤沢ビル) TEL(087)861-6633(代) FAX(087)861-6608

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル) TEL(092)471-6245(代) FAX(092)471-6288

熊本営業所 〒862-0954 熊本市中央区神水1-8-8(フォレストビル) TEL(096)387-3911(代) FAX(096)387-3884

U.S. (California) TAKEX AMERICA INC. TEL 408-747-0100 FAX 408-734-1100

U.K. (London) TAKEX EUROPE LTD. TEL 01256-475555 FAX 01256-466268

AUS. (Melbourne) TAKEX AUSTRALIA. TEL 03-9544-2477 FAX 03-9543-2342

竹中のセンサ

TAKEX

徘徊お知らせカタログ

Vol.5

老人福祉施設

高齢者専用住宅

病院

自宅

センサーが、高齢者の徘徊 行動を事前にお知らせします

施設や住宅の出入り口からの徘徊

◎アクセスコール徘徊お知らせ

1. 病院、施設向け

徘徊場所にセンサー付きアクセスコール受信機を設置

徘徊場所をお知らせ！

個人を識別してお知らせ！

微弱電波 最大8m

人の動きセンサーエリア

徘徊される方に送信機を携帯して頂きます。

通用口だわ！

チャンネル表示盤 CHN-5(F) (5窓用)

管理室に表示盤を設置します。

廊下に1番の〇〇さんがいるぞ！

アクセスコール表示盤 AC-1RH

2. 在宅向け

病院、施設でもご使用いただけます。
(小電力電波を採用し、簡単に設置できます。)

卓上型受信機

AC-2WM

電波到達距離 約100m

携帯型受信機

アクセスコール徘徊お知らせ(有線タイプ) P.4~P.7

アクセスコール徘徊お知らせ(ワイヤレスタイプ) P.8

- 微弱電波を常時発振する送信機「AC-T」を、徘徊される高齢者に携帯していただきます。
- ①送信機を携帯した方が、センサーエリアに入るとお知らせします。
 - ②送信機を職員や家族が携帯し、高齢者に負担をかけない設定も可能です。
 - ③セット商品「徘徊お知らせけいたいくん」は配線工事不要です。簡単に設置できます。(P.8)

ベッドや居室からの徘徊

◎マットセンサー／ベッドセンサーなど

マットセンサー(お待ちくん)

マットを踏んだ時にお知らせします。
ベッドサイドの床や、出入り口に敷いてください。

ベッドセンサー(起き上がりくん)

起き上がりをお知らせします。
ベッドのシーツの下やマットレスの下に敷いてください。

ベッドコーナーセンサー

ベッドの端にセンサーを敷き、
ベッドの端に座るとお知らせします。

徘徊お知らせ感知くん

センサーエリアに入るとワイヤレスで
受信機にお知らせします。
センサーは電池式で電源のない所にも
利用できます。

ワイヤレスタイプ

小電力電波にて、専用受信機にお知らせします。(電波到達距離:見通し約100m)

HC-350

RXF-60K

ナースコール連動タイプ

分配コンセントを合わせて使用し、既設ナースコールにお知らせします。
※分配コンセント一覧表(P.14~P.15)

ヘルスケア用機器の電波強度について

微弱電波とは 電波到達距離は見通し約8m(12m)
315.8MHzの周波数を使用

微弱電波商品 アクセスコールシリーズ

小電力電波とは 電波到達距離は見通し約100m
426MHzの周波数を使用

小電力電波商品 ワイヤレスシリーズ

(社)電波産業会発行「携帯電話端末等の使用に関する調査報告書」による、携帯電話の送信出力数値と当社使用の電波を比較しております。
電波強度を認識いただき、医療器具や人体に及ぼす影響についてご判断ください。

機種	微弱電波採用機器	小電力電波採用機器	携帯電話
送信出力	0.005mW	10mW	800mW
比較※	1/160,000	1/80	1

※比較は携帯電話を「1」とした場合

CONTENTS

アクセスコール徘徊お知らせ	4	ワイヤレス徘徊お知らせ お待ちくん	9
ワイヤレスシステム	8	ワイヤレス 起き上がりくん(離床センサー)	10
ワイヤレス徘徊お知らせ けいたいくん	8	ワイヤレス徘徊お知らせ 感知くん	10

ナースコール接続タイプ	12	ベッドコーナーセンサー(離床センサー)	13
マットセンサー	12	分配コンセント	14
起き上がりくん(離床センサー)	13		


送信機を携帯した人の徘徊行動をキャッチします

アクセスコール 徘徊お知らせ

微弱
8m
タイプ

送信機から常時発振している微弱な電波を受信機で受け、ご老人の徘徊をお知らせします。

■ アクセスコールシステムとは

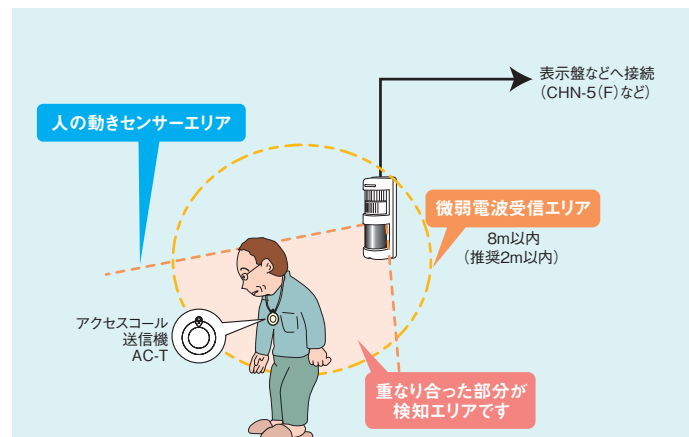


- 送信機を携帯した人がセンサーエリアに入ると、表示盤にお知らせします。
- 微弱電波を採用した（電波到達距離最大8m）のシステムです。
- 送信機を携帯した人にだけ反応します。

ここが
POINT!

- 受信機と人の動きセンサーの2種使いで、正確な検知エリアを設定できます。
- 徘徊場所と個人を特定してお知らせできます。

■ アクセスコール送信機 高齢者に携帯していただきます。

[AC-T 実物大]

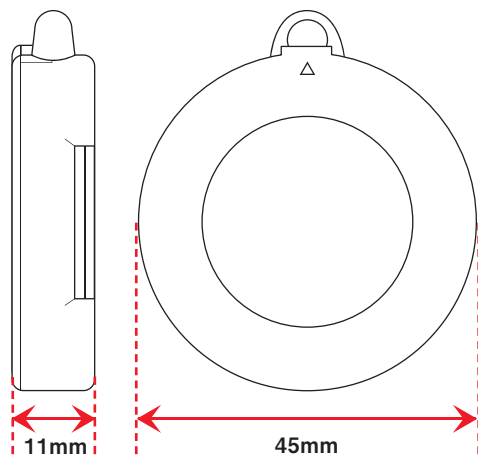

実物大です。

重さ約18g軽量で携帯しやすいサイズです。

※電池切れ表示はありませんので、定期的に変換して下さい。
※送信機「AC-T」は日常生活防水ですので、洗濯や入浴は動作不良および故障の原因となります。

アクセスコール送信機（常時発振式）

品番 AC-T 〈16,000円〉

（発振周期0.35秒 0.7秒 1.4秒 2.8秒選択）

- 安心の微弱電波を使用しています。
- 電波を常時発振します。
- 標準は0.7秒で設定してください。
0.35秒は動きの速いご老人など状況に合わせてご使用下さい。
- 市販コイン形電池1個で約1年連続発振。
（0.7秒設定時）（CR-2032 1個）
- 日常生活防水構造。
- リストバンド・お守り袋・首掛けひもの3種類の付属品が付いています。
- サイズ：φ45×11mm 質量：約18g

3種類の付属品



お守り袋



リストバンド




首掛けヒモ

- 使用上の注意
- アクセスコール受信機は屋内専用です。雨の掛かる場所や湿気の多い場所には設置しないで下さい。（AC-2HM、AC-2Rを除く）
 - 受信エリアを限定するために、人の動きセンサーなどを必ず併用して下さい。
 - 受信機と併用する人の動きセンサーは、送信機を携帯しているか否かに関わらず、すべての人を検知します。よって送信機を携帯している方が受信機近くに滞在され別の方がセンサーエリアに入るとシステムとして動作します。この場合、感度調整や延長アンテナを利用し受信機と人の動きセンサーの設置位置を工夫して下さい。
 - 電波検知距離は周囲の条件により大幅に変化します。
送信機の携帯方法、携帯者の速度や受信機の位置により受信できない場合があります。また、受信機の周辺が鉄筋建造物で電波を強く反射する場所と、反対に周囲に反射物が少ない場所とでは、検知距離が異なります。
送受信機間の距離が極力近くなる設置条件にしてください。送受信機間の推奨検知距離は2mです。

■ センサーは様々な場所に設置できます。

施設内から屋外への徘徊に

- 施設から屋外へ外出された所をお知らせ！
- 門扉付近への設置も可能です

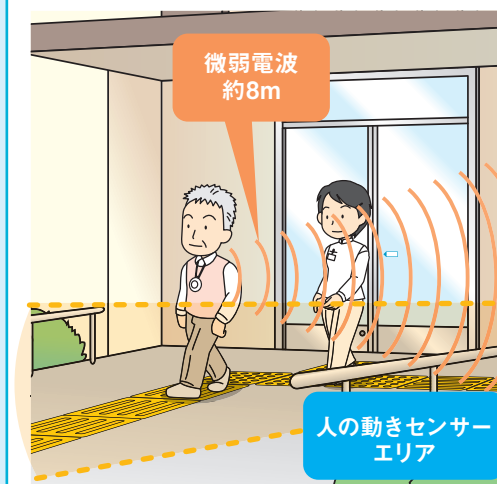


センサー付き アクセスコール受信機

- 人の動きセンサーと受信機が一体型になりました。
- フラッシュとメロディで明確にお知らせ。
- センサーは、角度調整、感度調整機能付きです。
- 高齢者／職員携帯モードの2モードを選択できます。


AC-2HM(W)/(G) ※グレー色もご用意しています（受注生産）

施設内


■ 玄関

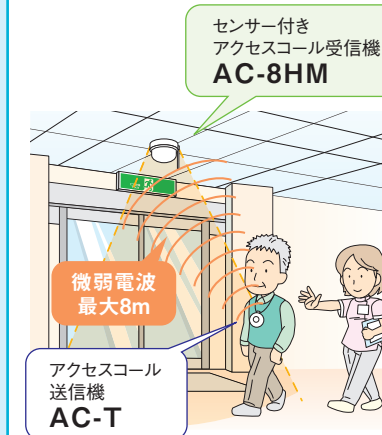


■ 非常口

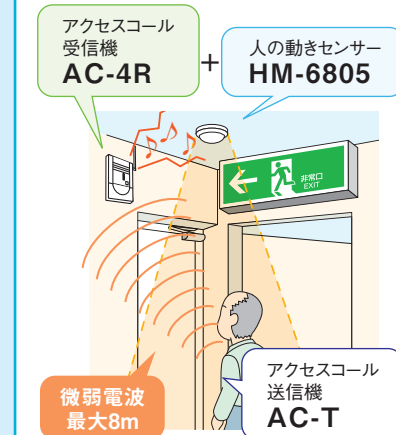


■ 廊下

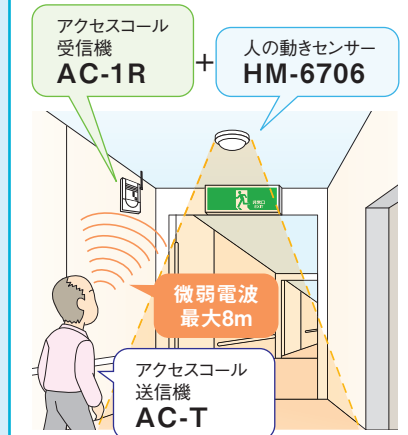

■ エレベーターホール

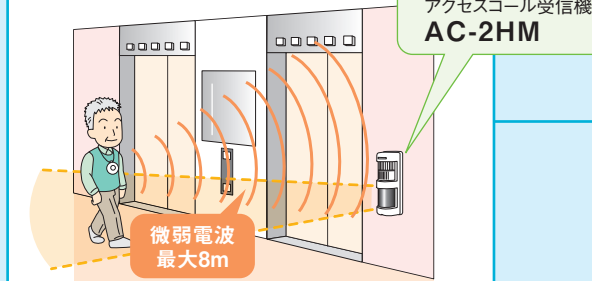

■ スタッフステーション

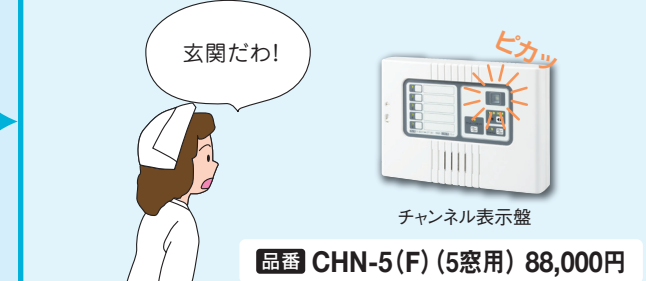

品番 CHN-5(F) (5窓用) 88,000円

■ アクセスコール受信機シリーズ

センサー付きアクセスコール受信機

品番 AC-2HM(W)/(G) 66,000円

品番 AC-2WM(W) 96,000円

- 人の動きセンサーと受信機が一体型になりました。
 - フラッシュとメロディで明確にお知らせします。
 - 壁面に設置するため、送信機との距離が近く、感度調整が容易です。
 - AC-2WMは、小電力送信機内蔵です。
 - AC-2HMは、屋外設置も可能です。(P.5をご参照ください)
 - 報知音(チャイム音)
- | | |
|------------------|----------------|
| 1CH ピンポンパンポン | 5CH ピーポー (緊急音) |
| 2CH プルプルプルプル | 6CH エリーゼのために |
| 3CH ポロロン | 7CH アニーローリー |
| 4CH ウーウーウー (緊急音) | 8CH ローレライ |

品番 AC-8HM 56,000円

● 天井設置にマッチしたデザインです。

アクセスコール受信機

データ出力機能付

品番 AC-1R 48,000円

屋外設置可

品番 AC-2R(W)/(G) 48,000円

4CH 個別出力可能

品番 AC-4R 48,000円

外部出力チャンネルスイッチ付き

品番 AC-8R 48,000円

※必ず人の動きセンサーと組み合わせてご使用ください。

機能早見表

品番	人の動きセンサー内蔵	外部出力 (既設アクセスコールやチャンネル表示盤へ)	データ出力 (アクセスコール表示盤へ)	小電力送信機内蔵	フラッシュ	メロディ	屋外設置
AC-2HM	○	総合出力×1	○	—	○	○	○
AC-2R	—	総合出力×1	○	—	○	○	○
AC-2WM	○	—	—	○	○	○	—
AC-1R	—	総合出力×1	○	—	—	○(チャイム)	—
AC-4R	—	個別出力×4 総合出力×1	—	—	—	○(チャイム)	—
AC-8R	—	総合出力×1	○	—	—	—	—
AC-8HM	○	総合出力×1	○	—	—	—	—

■ 人の動きセンサーシリーズ

- アクセスコール受信機に接続します。(AC-1R、AC-2R、AC-4R、AC-8R)
- AND入力センサーとして、電波のみでは不明確な検知エリアを明確にします。(P.5 設置イメージをご参照ください)

感度調整可 機械音なし リモート入力

品番 HM-6706 24,500円

感度調整可 機械音なし コンパクト

品番 HM-6805 18,000円

機械音なし エリア調整可

品番 HM-370 12,000円

機械音なし 壁面設置型 コンパクト

品番 HM-350 10,000円

ナースセンターや管理室に設置

システム事例.1 徘徊場所を確実にお知らせします。

通用口だわ!

チャンネル表示盤

品番 CHN-5(F) (5窓用) 88,000円

- AC-Tを携帯した人がセンサーエリアに入ると、「報知音」と「LED」で表示し、お知らせします。
- 最大4ヶ所まで増設でき同時表示します。(CHT-4除く)
- 1窓用～20窓用まで、各種ラインナップを取り揃えています。
- 報知音はメロディを選択できます。

1窓用

品番 CHN-1 38,000円

4窓用

品番 CHT-4 48,000円

10窓用

品番 CHN-10(F) 118,000円

20窓用

品番 CHN-20(F) 178,000円

システム事例.2 個人識別してお知らせします。

■ アクセスコール送信機

内部スイッチにより、15通りの番号設定ができます

品番 AC-T

アクセスコール表示盤で、徘徊場所と個人を識別してお知らせ!

廊下

センサー付きアクセスコール受信機 AC-8HM

微弱電波 最大8m

非常口

人の動きセンサー HM-6706

微弱電波 最大8m

アクセスコール受信機 AC-1R

非常口に1番の〇〇さんがいるわ!

アクセスコール表示盤 AC-3RH

- 送信機の設定番号をデジタル表示します。
- 合計15名まで識別できます。
- 1台で3ゲート分各15名表示します。(1ゲート45名の表示も可能)
- 最大3ヶ所まで増設でき同時表示します。

1ゲート15名表示

品番 AC-1RH 120,000円

3ゲート15名表示

品番 AC-3RH 180,000円

徘徊をお知らせする専用受信機／ナースコールと切りわけできます

ワイヤレス徘徊お知らせ

小電力
100m
タイプ

介護保険
制度対象
商品

専用受信機に徘徊をお知らせします。配線工事不要です。

ここが
POINT!

簡単設置・配線工事不要

- 送信機から、受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。
ご家族や既設ナースコールがない場所にも簡単に設置できます。

増設できます

- 各1台ずつのセット商品です。
ご要望にあわせて、それぞれ追加が可能です。

中継機 RTX-F-300


- 電波が直接届かない場所に送信機からの電波を受信して受信機へ再送信します。
- 中間に1台設置すると、見通し100m電波距離を延長できます。(無制限に増設できます)

送信機を携帯した人がセンサーエリアに入るとお知らせします

ワイヤレス徘徊お知らせ けいたいくん

- 徘徊場所に受信送信機を設置して使用します。
- 送信機は携帯しやすいサイズです。

受信送信機が送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが感知すると→お知らせします!

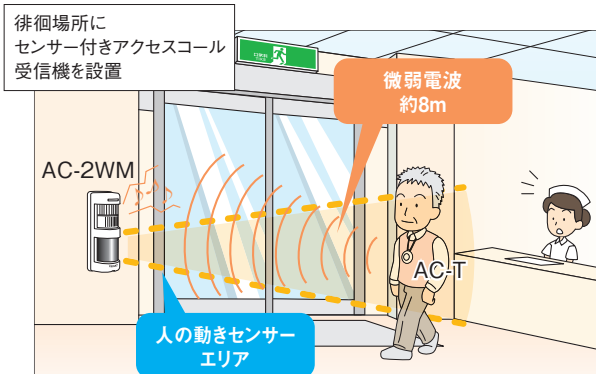

電波到達距離
約100m

ご家族や職員が送信機を携帯する
設定ができます。

卓上型受信機セット



携帯型受信機セット



ここが
POINT!

- 送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけない方法も可能です。

徘徊される方を
特定して
お知らせします。



内部スイッチで、
高齢者モード⇄職員モードを
切替できます。




職員が携帯することで
高齢者に負担を
かけません。

マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします

ワイヤレス徘徊お知らせ お待ちくん

- 徘徊場所にマットセンサーを敷いて使用します。
- 受信機は「卓上型受信機」と「携帯型受信機」をラインアップしました。

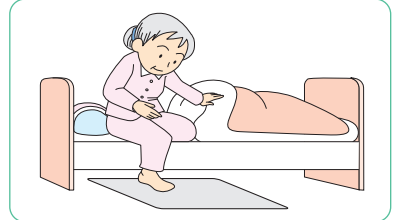

マットセンサー + 送信機 一体型タイプ

- マットセンサーは検知部と送信部一体型!
コードによるつまづきなどの心配はありません。



電波到達距離
約100m

選べる 受信機



卓上型受信機



携帯型受信機

卓上型受信機セット



携帯型受信機セット



ここが
POINT!

マットセンサ
送信機

- 400mm×800mmの使いやすいサイズです。
- 休止タイマーで、動作を一時的に休止します。(約5分間)
- 電池残量が少なくなると、送・受信機でお知らせします。
- 厚さ6mmの高感度薄型タイプで、床からずれにくいように裏面にすべり止め加工をしています。
- 簡易防水構造です。

コードタイプ


- マットセンサーは2種類から選択できます。 M-38 : W800×H300×D6mm
M-68 : W800×H600×D6mm

- マットセンサーのON/OFFができる中間スイッチ付き。

- マットセンサー、受信機はそれぞれ増設できます。


※マットセンサーの仕様は、P12をご参照下さい。

卓上型受信機セット

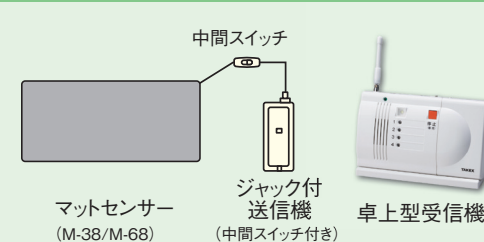

品番 HS-W(T) 84,000円 (M-38セット)
品番 HS-W68(T) 104,000円 (M-68セット)

携帯型受信機セット


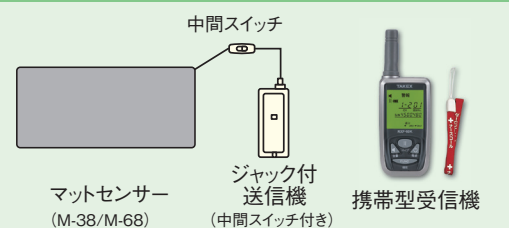


品番 HS-W(KE) 110,000円 (M-38セット)
品番 HS-W68(KE) 130,000円 (M-68セット)

ベッドからの起き上がりをお知らせします

ワイヤレス 起き上がりくん(離床センサー)

- ベッドセンサーは、シーツの下やマットレスの下に敷いて使用します。
- ベッドから起き上がりたり、離れたりは困る方にご利用下さい。

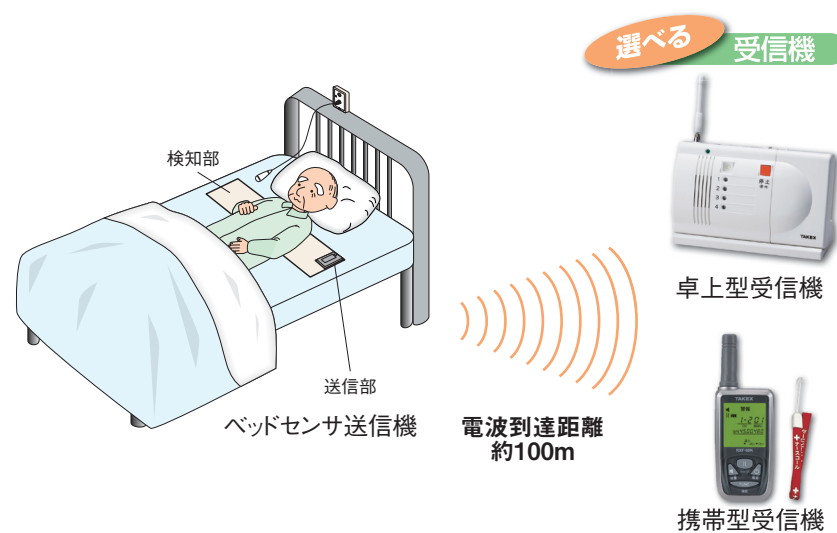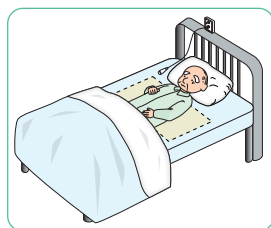

ここが
POINT!


ベッドセンサ
送信機

- ベッドセンサーは、検知部と送信部一体型!簡単に設置できます。
 - 起き上がり判定時間を、8通りから設定可能です。(1~8秒)
- | 設定時間 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | |
- 休止タイマーで、動作を一時的に休止します。(約5分間)
 - センサー部は、厚さ4mmの高感度薄型タイプです。(サイズ:250mm×800mm)
 - ずれないように「裏面滑り止め」「ひも通し穴付き」です。
 - 簡易防水構造です。

卓上タイプで設置場所を選びません!

ワイヤレス徘徊お知らせ 感知くん

- センサーエリアに入るとワイヤレスで受信機にお知らせします。
- センサーは電池式で電源のない所にも利用できます。

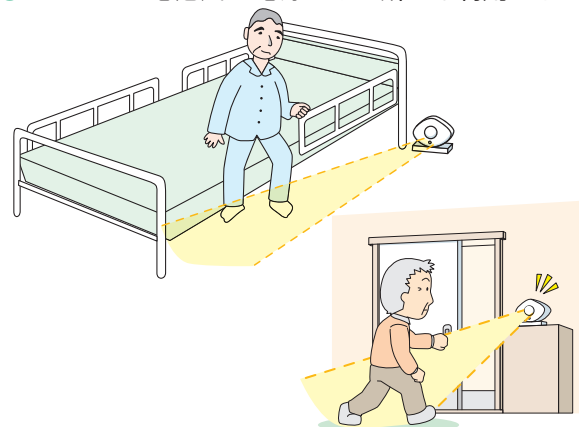

ここが
POINT!

- 持ち運びに便利な卓上型センサー!
- ベッドサイドや部屋の入口など、必要に応じて簡単に移動できます。

卓上型受信機セット



品番 HW-BS3(T) 126,000円

携帯型受信機セット



品番 HW-BS3(KE) 140,000円

卓上型受信機セット



品番 HS-106(T) 63,000円

携帯型受信機セット



品番 HS-106(KE) 77,000円

用途に合わせて選べる『受信機』

卓上型受信機



- 送信機からの電波を受信すると、優しいメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。
- メロディ(チャイム音)は、8種類から選択。
- 簡単設置!卓上に置いて、ACアダプタをコンセントに差し可以使用。
- センサーを30台まで登録できます。

品番 HC-350 38,000円

携帯型受信機



- 携帯して移動できます。
- 3段階の音量、またはバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。
- お知らせ時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)
- 約60g(電池含む)と軽量で、持ち運びに便利です。
- ナースコールストラップ付です。
- センサーを50台まで登録できます。

品番 RXF-60K 52,000円

周辺機器(増設用)

- センサーと受信機は組み合わせ自由で増設可能です。
- ※増設時には電波登録が必要です。



アクセスコール受信送信機

- AC-Tを携帯した人がセンサーエリアに入ると、受信機にワイヤレスでお知らせします。
- 見通し100m先の受信機に電波を送信できます。

品番 AC-2WM 96,000円



アクセスコール送信機

(発振周期0.35秒・0.7秒・1.4秒・2.8秒 選択)

- 微弱電波を使用しています。
- 市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を送信します。(0.7秒設定時)
- 日常生活防水です。
- φ45×11mm、質量約18g

品番 AC-T 16,000円



中継機

- 電波が直接届かない場合に、送信機からの電波を受信して受信機へ再送信します。
- 無制限に増設できます。



品番 RTXF-300 65,000円



パッシブセンサー送信機

- 電池式で電源のない所にも利用できます。
- 見通し約100m先の受信機に電波を送信します。

品番 TX-106 25,000円


※増設時には別途、電波登録が必要です。

マットセンサ送信機




品番 TX-M48 84,000円

ベッドセンサ送信機

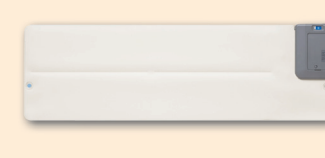

品番 TX-BS3 88,000円

コードタイプ

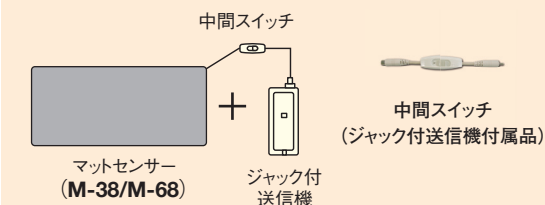

品番 M-38 38,000円+ 品番 ジャック付送信機 24,000円
品番 M-68 58,000円+ 品番 ジャック付送信機 24,000円

既設ナースコールに徘徊をお知らせするシステムです。

ナースコール接続タイプ


分配コンセントと組み合わせて使用します。(P.14参照)

介護保険
制度対象
商品

ベッド下の床下や部屋の出入り口に敷いて徘徊をお知らせします

マットセンサー

- ベッドから離れたり、部屋から出て行かれては困る方にお使いください。
- マットを踏むとナースステーションにお知らせします。

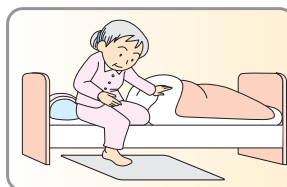

標準タイプ M-38、458、68、4512

持ち運びに便利な 標準タイプのマットセンサー



マットの飛び越えをふせぐ 縦長タイプのマットセンサー



少し大きなマットセンサー




門口の広い場所に効果的な 横長タイプのマットセンサー



ローコストタイプ MA-48、610

- サイズは400mm×800mmと600mm×1000mm(ワイドサイズ)の2通りを揃えています。
- 表面、裏面とも同じ材質で、リード線の補強材料を綿糸に変更することでローコストを実現。

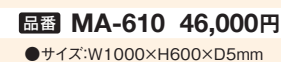

ここが
POINT!

POINT1

■ケブラー繊維



リード線に、ケブラー繊維を組み込みました。
強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。
(MAシリーズは、綿糸入り)

POINT2




リード線引き出し部
はプッシュ加工にし、
強い引っ張りに耐え
ます。
(Mシリーズ)

POINT3



表面

つまづかないように、
滑らかな加工をして
います。

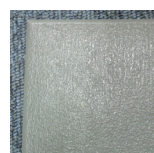

裏面

滑りにくい材質で、エンボス
加工(凸凹面)をしています。
(MAシリーズは表裏一体)

POINT4

重量感があり、床面に密着します。
表面の凸凹をなくし、歩きやすい設計です。


足の引っかかりやつまづきを軽減します。

ベッドからの起き上がりをお知らせします 1秒単位で起き上がり時間を設定できます。

起き上がりくん(離床センサー)

- ベッドから起き上がった、離れたりしては困る方にお使いください。

選べる

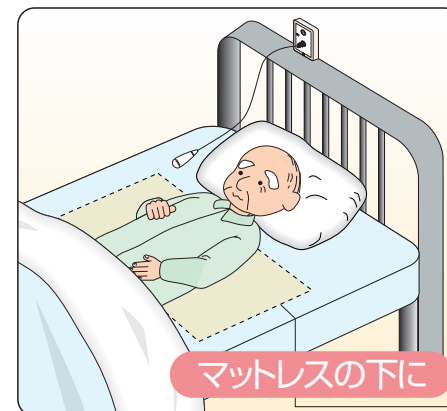


ベッドセンサー+ベッドセンサー変換器



ここが
POINT!

POINT1 検知部と設定部一体型!

ベッドセンサー(一体型)
品番 BX-BS3 72,000円
電池仕様で、運用・取り扱いが
容易です。

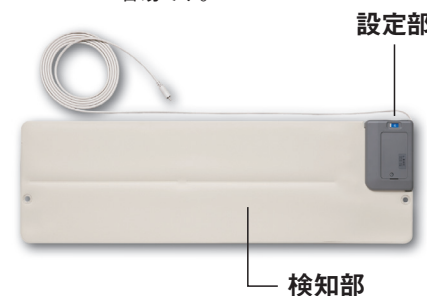

体圧分散マットレスや、体重の軽い方に対応できるように設定しています。
敷布団やマットレスの下に敷いてご使用いただけます。

※ただし、確実に検知するために、できるだけシーツの下に敷いていただくことをおすすめします。

設定時間	合計16種より選択
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 30秒/1, 3, 5, 10, 30分	

POINT2 豊富な起き上がり時間設定

ベッドセンサー変換器(ワイヤレス)
品番 BX-1 32,000円



※BS-3と合せてご使用下さい。
秒単位で起き上がり時間設定が
できます。


ボリューム	秒モード	分モード
1	1秒	1分
2	2秒	2分
3	3秒	3分
4	4秒	4分
5	5秒	5分
6	6秒	6分
7	7秒	7分
8	10秒	8分
9	15秒	9分
10	50秒	10分

POINT3 ずれないベッドセンサー

裏面滑り止め加工

ひも通し穴付き



背上げ時にずれないようにマットレスに
固定できます。
(ひもは別途ご用意下さい。)

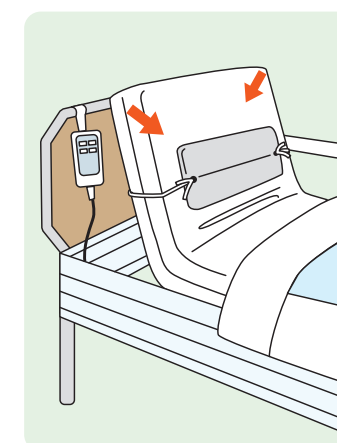

ベッドから降りるタイミングでお知らせします

ベッドコーナーセンサー(離床センサー)

ベッドマットの端に敷いて離床や落下をお知らせします。

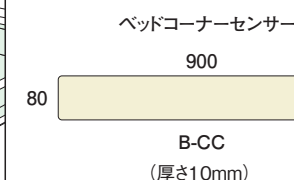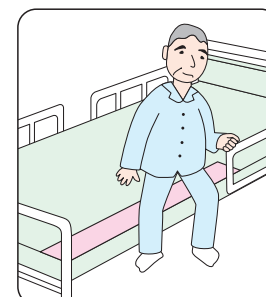

分配コンセントにて
ナースコールに接続
P.14

ナースステーションへお知らせ

ベッドコーナーセンサー



品番 B-CC 34,000円

既設ナースコールに徘徊をお知らせします。

分配コンセント一覧表


各種センサーと組み合わせて使用します。

使用方法

マットセンサー P.12

起き上がりくん P.13

ベッドコーナーセンサー P.13

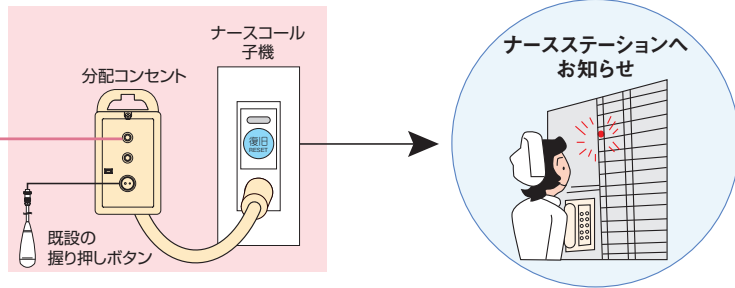

ナースコールへの接続

分配コンセント

現在お使いのナースコール子機「差込口」形状をご確認のうえ、対応する商品をお選び下さい。
分配コンセントはすべて露出型で裏面にマグネットが付いています。




ご注意 分配コンセントは、握り押しボタンやハンド子機を接続しないと、脱着断線信号が出る場合があります。
主にマットセンサー、ベッドセンサーを既設の握り押しボタンと並行してご利用頂く機器となります。

変換ジャック


主にマットセンサー、ベッドセンサーを既設のナースコールに直接接続してご利用頂く機器となります。

ケアコム専用

分配コンセント


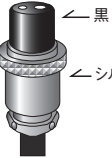
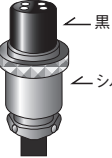
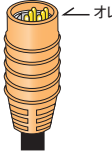
	①	 ← 黒 ← シルバー	分配コンセント(ケアコム仕様) BC-S 〈10,000円〉 メタコン2ピン ●ナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます。 ●3入力1出力(メタコン2ピン プラグ対応) ●リード線長さ:1.5m ●外形寸法:W64×H123×D25.5mm ご注意:メタコン2ピン仕様は、バナソニック2ピン仕様と接続できません。
	②③	 ← 黒 ← シルバー	分配コンセント(ケアコム仕様) ② BC-4RS 〈15,000円〉 多重線R型、省線式S型専用 ③ BC-4Z 〈15,000円〉 デジタルZ型専用 ●4ピン ハンディナースコール対応 ●3入力1出力(メタコン4ピン プラグ対応) ●リード線長さ:1.5m ●外形寸法:W64×H123×D25.5mm
	④	 ← オレンジ	ケアコム社製 分配コンセント(ケアコム仕様) BB-301WZ-2P/W6P-NC 〈16,000円〉 well6ピン ●Wellシリーズのナースコール接続用。既設の握り押しボタンと併用できます。 ●2入力1出力(2ピンメタコン、well6ピン対応) ●リード線長さ2m ●外形寸法:W75×H114×D34mm

変換ジャック

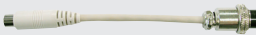メタコン2P仕様 		メタコン2ピン変換ジャック HC-MJ 〈4,000円〉 ●各種センサープラグ出力をメタコンピンのナースコールに接続します。
--	---	---

アイホン専用

分配コンセント

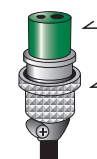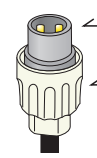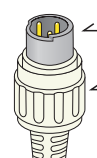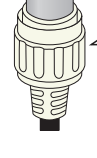	①	 ← うぐいす色 ← シルバー	分配コンセント(アイホン仕様) BC-S 〈10,000円〉 メタコン2ピン ●ナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます。 ●3入力1出力(メタコン2ピン プラグ対応) ●リード線長さ:1.5m ●外形寸法:W64×H123×D25.5mm
	②	 ← グレー ← クリーム色	分配コンセント(アイホン仕様) BC-S(P2) 〈10,000円〉 ブラコン2ピン ●アイホン製ナースコール、ブラコン2ピン接続用 ●既設の握り押しボタンと併用できます。 ●3入力1出力(ブラコン2ピン プラグ対応) ●リード線長さ:1.5m ●外形寸法:W64×H123×D25.5mm
	③	 ← グレー	分配コンセント(アイホン仕様) アイホンNFR3ピン仕様 BC-S(N3) 〈10,000円〉 アイホンNFR5ピン仕様 BC-S(N5) 〈10,000円〉 アイホンNFR6ピン仕様 BC-S(N6) 〈10,000円〉 NFR3・5・6ピン ●アイホン製NFX3ピン、5ピン、6ピンナースコール接続用既設の握り押しボタンと併用できます。 ●3入力1出力(NFR3ピン、5ピン、6ピン、プラグ対応) ●外形寸法:W40×H142.5×D25.5mm ●リード線長さ:1.5m
	④	 ← グレー	
	⑤	 ← クリーム色	

変換ジャック

NFRシリーズ仕様 	 ← グレー ← クリーム色	変換ジャック HC-N3J(アイホンNFR3ピン) 〈4,500円〉 HC-N5J(アイホンNFR5ピン) 〈4,500円〉 HC-N6J(アイホンNFR6ピン) 〈4,500円〉 ●アイホン製NFX3ピン・5ピン・6ピンナースコール接続用ジャック ●マットセンサー及び各種受信機を接続する場合に使用します。 ●リード線長さ:1.5m ●アイホン専用です
ピーナース仕様 	3.5変換ジャック (ピーナース専用) HC-3.5J 〈3,000円〉 ●全長:140mm	接続例  オプション入力用コンセントに接続してください。 オプション入力コンセント NLR-OP  オプション・コードに接続してください。 オプション入力コンセント NLR-OP

ナカヨ専用

分配コンセント

	分配コンセント(ナカヨ仕様) BC-S(M) 〈14,000円〉 モジュラー ●ナカヨ製埋込式インターホンYC-INT-WMTに接続します。 ●握り押しボタンNYC-INT-CG2 / CG5 ●フックと磁石付です。 ●外形寸法:W64×H123×D25.5 ●重量:70g ●付属品:4極モジュラーコード(3m)
---	---