



Automatic Air Massager

カタログNo. **L415b**

医療機器認証番号
225AHBZX00015000

2015年10月価格改定

家庭用 エアマッサージ器

ドクターメドマー®

型式 **DM-6000** PAT

●両脚セット ●ショートブーツセット ●片腕セット



エアマッサージで、
健康な身体づくり



お好みで選べる
4種類のマッサージモード

- ウェーブモード(もみ上げ)
- ハイパーモード(同時加圧)
- スクイズモード(絞り上げ)
- コースモード(組み合わせ)

電源コードをACインレット化、
ファスナー交換ベルトの採用で
メンテナンス性が大幅UP

Dr. MEDOMER®



ビジネス・スポーツ・家事・外出の後の筋肉の疲れを効果的にやわらげます

ソフトな空気力で血行促進マッサージ！ 今日から身体、軽やか爽快！！

抗菌
生地

片腕セット

(本体+アームバンド用ホース+アームバンド)

抗菌
生地

ショートブーツセット

(本体+ショートブーツ用ホース+ショートブーツ)

AC
インレット型
電源コード

抗菌
生地

ガイド表示
ホースを束ねる
位置を表示

ガイド表示
ホースの差し込み
方向を表示

両脚セット


(本体+両脚用ホース+ブーツ)

Automatic Air Massager
Dr. MEDOMER®

DM-6000 PAT

「血液とリンパ液の効果的な流れの促進」をテーマに、使いやすさと理想的な効果の追求から誕生した「ドクターメドマー」。機能性・操作性・耐久性に優れ、しかもコンパクト設計。ゆったりとくつろいだ姿勢で手軽にご利用ください。※体を温めリラックスした状態でご利用いただくと最も効果が得られます。

脚は第二の心臓。歩く度に血液を心臓へ送るポンプです。

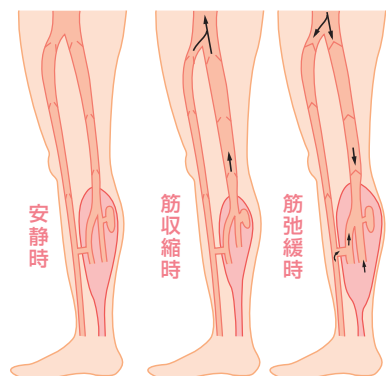


ふくらはぎの筋肉は足先から心臓へと血液を送る役割もしています。

歩く運動は「ふくらはぎ」の筋肉運動で、下半身にたまった静脈血液を心臓に押し上げる作用を促進し、脚の血行を高めます。そして、からだ全体の血行を活発にします。

血流促進が大切な理由


血液は心臓というポンプによってからだの中を循環しています。心臓を中心として送りだされる「血液を運ぶ血管」を**動脈**、反対に心臓にもどる「血液が通る血管」を**静脈**といいます。血液の場合、渋滞が起こりやすいのは静脈で、特に太ももから下の脚部は、心臓から遠く、下の方にあるため、一番渋滞が起こりやすい部分なのです。

マッサージは、血液の慢性的渋滞部分ともいべき下肢静脈血の心臓への還流促進にすぐれた効果を発揮します。

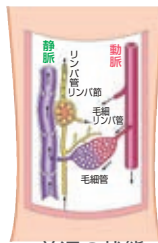

普通の状態

静脈に空気圧を加えて圧縮し、血液の循環を促進させます。

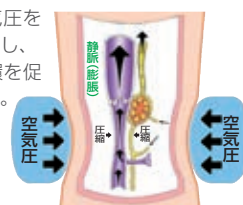

メドマー使用時

効能・効果

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の
痛みの緩解

特長


- 圧力センサによる制御で、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが行えます。
- 空気袋をオーバーラップさせてあり、もみ残し部位のない効果的なマッサージが行えます。
- すべての操作がスイッチボタンで簡単にでき、手軽にご利用いただけます。
- ソフトな空気圧によるマッサージで、局所的な痛みや電気的な刺激がなく快適です。
- 電源コードをACインレット化して劣化・損傷時の交換を容易にしました。
- ファスナー交換ベルトの採用でファスナー交換を容易にしました。

血行(血流)を阻害しない、最適な加圧 ▶

もみ残し部位のない
オーバーラップ機能 ▶




※気室はイメージです。実際の配置とは異なります。

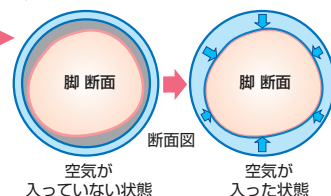

※電源投入時

使いやすい操作パネル

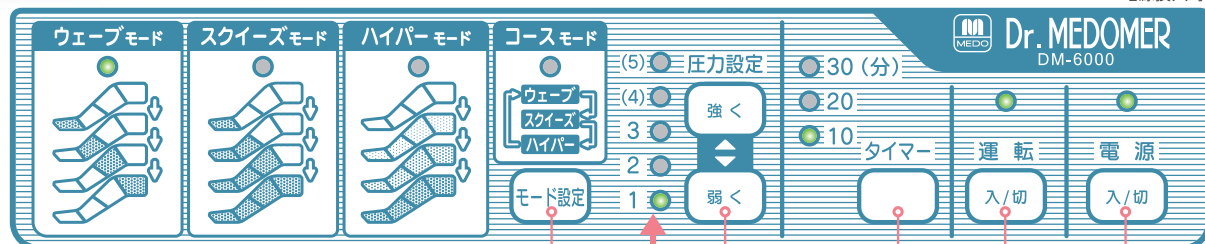

4種類のマッサージパターンが選べます。
「モード設定ボタン」を押すだけで、簡単に4種類の
モードを切り換えでき、LEDランプの点灯で
選択モードを確認できます。

モード設定ボタン
4種類のマッサージ
モードが選べ
いただけます
設定されたモードには緑色
の表示ランプが点灯します。


圧力設定ボタン
5段階の強弱が
お選びいただけます
安全のため、圧力「4」「5」
はボタンを1秒以上押さな
ければ作動しません。

タイマーボタン
3種類の時間設定を
お選びいただけます

電源入/切ボタン
本機を使用する際、
最初に押してください

運転入/切ボタン
マッサージを始める
際に押してください

mium Massage

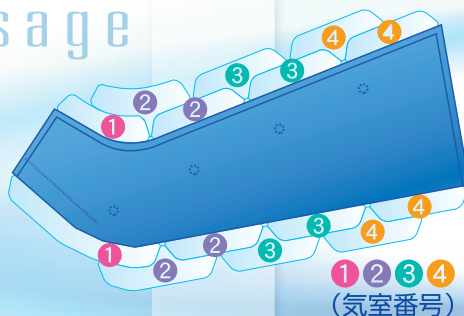

圧力表示 ランプ	気室圧力 kPa (mmHg)				
	ウェーブモード 1	スクイーズモード 2	スクイーズモード 3	スクイーズモード 4	ハイパーモード 全気室
(5) ●	17.3 (130)	16.0 (120)	14.7 (110)	12.0 (90)	17.3 (130)
(4) ●	14.7 (110)	13.3 (100)	12.0 (90)	10.7 (80)	14.7 (110)
3 ●	12.0 (90)	10.7 (80)	9.3 (70)	9.3 (70)	12.0 (90)
2 ●	9.3 (70)	8.0 (60)	6.7 (50)	5.3 (40)	9.3 (70)
1 ●	4.0 (30)	4.0 (30)	4.0 (30)	4.0 (30)	4.0 (30)

注) 上記圧力は1.3kPa程度のバラツキがあります。

圧力設定ボタンを押すだけで、簡単に圧力調節ができます。

加圧のしくみ

進化したマッサージ機能


4種類の マッサージモード

加圧
排気
血流

ウェーブモード(もみ上げ)



スクイーズモード(絞り上げ)

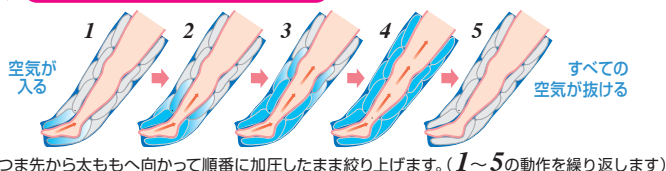

ハイパーモード(同時加圧)




コースモード(3モードの組み合わせ)



「ウェーブ2回→スクイーズ2回→ハイパー1回」の動作を繰り返します。

5段階の圧力設定で
お好みの強弱を
お選びいただけます。

安全のため、圧力「4」「5」は
1秒以上ボタンを押し続け
なければ設定できないよう
になっています。

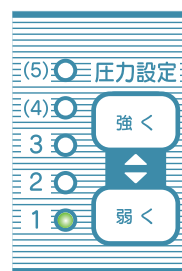

注意

通常、圧力設定は「3」以下で
ご使用ください。特に肌の
弱い方は、圧迫が残ること
があります。安全のため、圧力
「4」「5」は1秒以上ボタン
を押し続けなければ設定で
きないようになっています。

家庭用 エアマッサージ器

ドクターメドマー[®]

医療機器認証番号 225AHBZX00015000

型式 **DM-6000** PAT

類 別：機械器具77 バイブレーター
(JMDNコード:34663000)

一般名称：家庭用エアマッサージ器

クラス分類：Ⅱ (管理医療機器)

特 定 保 守：非該当

両脚セット



178,000円
+消費税



両脚用ホース

■主な仕様

電 源		AC100V 50/60Hz
消費電力（待機中）		34/29W（3/3W）
もみ上げ サイクル	ウェーブモード	約50秒
	スクイズモード	約35秒
	ハイパーモード	約24秒
タイマー設定時間		10分、20分、30分
空気圧設定範囲		4.0 ～ 17.3kPa（30～130mmHg）
定格時間		30分
質 量		本体：4.8kg ブーツ2本：0.85kg ホース：0.95kg

ショートブーツセット



145,000円
+消費税



ショートブーツ用
ホース

片腕セット



128,000円
+消費税



アームバンド用ホース

●オプション (別売品)

ホース(消耗品)

●両脚用 H-52A
11,000円+消費税

●片脚用 H-50A
6,600円+消費税

●ショートブーツ用 H-53A
11,000円+消費税

●アームバンド用 H-51A
8,000円+消費税

電源コード(消耗品)

●電源コード CAB-100
3,300円+消費税

ファスナー交換ベルト(消耗品)

●ブーツ用
Z-6000
4,070円+消費税

●ショートブーツ用
ZSB-6000
3,850円+消費税

Lサイズベルト(消耗品)

●ブーツ用
Y-50A
4,070円+消費税

●ショートブーツ用
Y-52A
3,850円+消費税

●アームバンド用
Y-51A
3,850円+消費税

ブーツ(消耗品)

●脚用
B-6000
38,500円+消費税

ショートブーツ(消耗品)

●脚用
SB-6000
22,000円+消費税

アームバンド(消耗品)

●腕用
U-6000
30,000円+消費税

▲ 使用上の注意 「ドクターメドマー」を使用する場合、以下の点に注意してください。

▲ 警告

- 次の人は、本機の使用を禁止します。
 - 医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(瘤)、急性静脈性(瘤)、各種皮膚病および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
 - 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。
※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
 - 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
- 本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。事故の原因になります。

▲ 注意

- 次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人
 - 心臓に障害がある人
 - 高血圧症と診断されている人
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人
 - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(背椎)の骨折、急性(とう)痛性疾患の人
 - 妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
 - 安静を必要とする人
 - 特に身体に異常を感じている人
 - 皮膚の弱い人
 - 治療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
 - 治療部位に骨折、脱臼、肉ばね、ねんざ、皮膚に創傷のある人
 - 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
 - 自覚症状の意思表示がでない人
 - 本機の使用によりかえって疼痛の増す人
 - 本機を使用して症状の改善が見られない人
 - 腱鞘炎の人(アームバンド使用時に限る)
- 通常、圧力設定は「3」以下でご使用ください。特に肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。

◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。 ◆本カタログに記載の仕様および内容は2015年9月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命は：

販売元

メド産業株式会社

本 社 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-9-4
TEL 03 (5748) 5521 (代表) FAX 03 (3754) 0258
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10
TEL 06 (6976) 3271 (代表) FAX 06 (6976) 3841

製造販売元

日東工器株式会社

製品に関する様々な情報をご案内しております。

www.medo.co.jp/

eメールアドレス：sales@medo.co.jp

《お客様ご相談窓口》メド産業株式会社

0120-265-521

フリーコール 受付時間：AM9:00～PM5:00 (土・日・祝日を除く)



※本カタログの無断複写を固くお断わりします。

15INet07-①