

FUJIIRYŌKI

マッサージチェア
LS-500ZG

スムーズに座れて、全身をほぐす。
空間に冴えるスタイリッシュデザイン。

詳しくは製品サイトへ



もみ心地に
こだわった
7種類のもみ技

首からもも裏
までほぐす
**ロング
ストローク
マッサージ**

腰・座面
ふくらはぎを
**エアー
マッサージ**

空間を圧迫しない低重心設計で
乗り降りもスムーズにラクラク。

足を上げずに座れて、立ち上がりもスムーズ。ゆったり腕を置ける
アームレストと、ソファのような座り心地でラクに施療が受けられます。

空間広々、ロースタイルデザイン



リラックスした姿勢で
心地よいマッサージを実現。

座ったままの体勢で後方にリクライニング。体圧を分散させ、まるで
浮いているかのようなリラックスした姿勢でマッサージが受けられます。

フロートリクライニング



こだわりのもみ技で全身の疲労をリフレッシュ&ケア

4つ玉もみメカ

7つのもみ技を可能にする4つ玉メカでマッサージします。



L字ロングストローク

L字フレームで首からもも裏まで広範囲にマッサージします。

施術範囲
95cm



腰・座面・ふくらはぎをエアーマッサージ

エアーマッサージ

腰・座面・ふくらはぎ部分に合計10個のエアバッグを内蔵。強さは強弱の2段階で調節できます。



エアバッグ
10個



ヒーター搭載

ふくらはぎ裏側に搭載したヒーターがスピーディーかつ広範囲に温めます。



マッサージチェア L057 LS-500ZG

メーカー希望小売価格:272,800円(税込)

【商品仕様】

- 本体寸法:
〈リクライニングしていない時〉
幅 約69cm 奥行約112cm 高さ約112cm
〈リクライニングしている時〉
幅 約69cm 奥行約148cm 高さ約81cm
- リクライニング角度: 約118度~約153度
- 質量: 約55kg
- 定格時間: 30分(オートタイマー約15分)
- 電源: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: 60W(ヒーターのみ15W)
- 医療機器認証番号: 302AKBZX00024000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

ブラック(BK)

JANコード:
4951704170871



別売品

首肩専用不織布カバー(30枚入り)

- 寸法:
横 約40×縦 約71cm
- 材質: 不織布

メーカー希望小売価格
3,278円(税込)



簡単なリモコン操作で、快適マッサージ

- 残り時間表示ランプ(1回約15分)
- もみ玉位置調節ボタン
- 自動コース選択ボタン
- 全身 肩・背 腰・尻 リラックス
- マニュアル(手動もみ技)選択ボタン
- 入/切ボタン
- 急停止ボタン




全7種類 もみ たたく さざなみ 背筋のぼし



NEW リズムたたく

たたく速度を周期的に変化させ、緩急をつけたマッサージ。

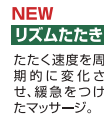

NEW リズムもみ


揉んで止める、リズムミカルなマッサージ。



- ・エア動作選択ボタン【腰・座面・ふくらはぎ】
- ・フットストレッチボタン(入・切)
- ・背筋のぼし【全体・部分】
- ・ヒーター(入・切)

- ・自動リクライニングボタン
自動で背もたれが倒れ、脚部が上がります。コースが終了すると自動で戻ります。
- ・収納ボタン
- ・リクライニング調節ボタン【背もたれ・脚部】

【寸法 (cm)】

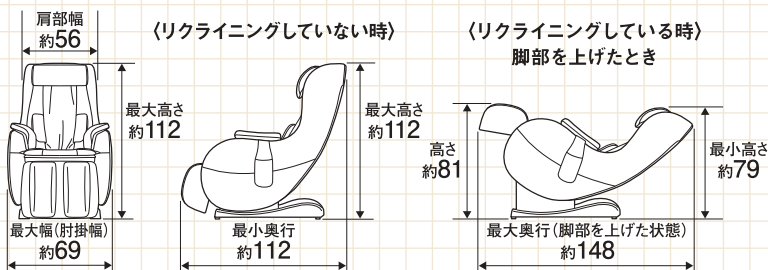

搬入幅 約71cm 搬入幅: 本体幅69cm+2cm(養生のため)以上が必要です。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する事。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル 0120-027-612

受付: 平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。

FAX番号

06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2020年8月現在のものです。

21.02.1M.BQ.AJ.B. [注文No.1602]