

超高齢化社会を高齢者の皆様が
安心・安全に暮らせる見守りを支援する

mamo-L Welfare Series



介護保険レンタル対象製品 認知症老人徘徊感知機器

お出かけアラートDX

製品番号:TRKM_MMLBLE01

TAISコード:02097-000004



アラート発信機




お出かけ端末
(Welfare BLE)

機能イメージ

介護保険レンタル対象(認知症老人徘徊感知機器)

ご自宅等からの徘徊初動をアラート音でお知らせ

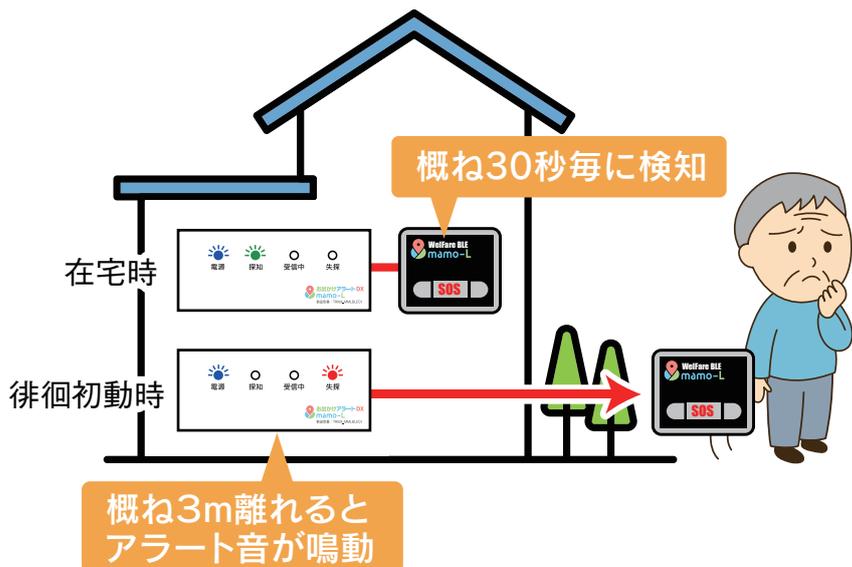

介護保険対象外(GPS通信)

外出後の徘徊行動を見守り

スマホやパソコンから
専用WEBアプリで
徘徊者の現在位置や
行動履歴を確認できます



GPS機能付加

お出かけ端末を、うららかGPSウォークシリーズに入れてご利用いただけます。

mamo-L端末を
格納できる
うららかGPS
ウォークシリーズ




▶ お出かけアラートDXのご利用方法

① 納入時の設置方法

●アラート発信機

付属の専用ACアダプタを接続して、コンセントにつなぎます。

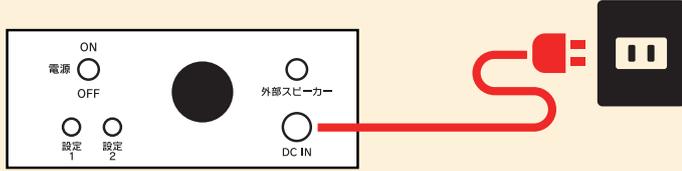

●お出かけ端末

充電後、電源を入れて靴(うららかGPSウォーク)等に装着します。



準備は
これだけ!

② 設置完了で、アラート発信機がお出かけ端末の徘徊初動を検知します。

お出かけ端末を
概ね30秒毎に検知



お出かけ端末と
アラート発信機が
概ね3m離れると
アラート音鳴動



在家中



在宅検知中



徘徊初動感知

※アラート音鳴動



初動感知後の検知中

※アラート音鳴動なし

●ご自宅等からの徘徊初動感知時はアラート音でお知らせします。

- 徘徊初動感知時のアラート音は約5秒で一旦止みます。
- 次の検知タイミングにお出かけ端末を検知できればアラート音は鳴りません。お出かけ端末を検知できなければアラート音が再度鳴ります。
- 以下、同様です。

③ GPS機能付加で外出後の徘徊行動を見守ります。

- 専用WEBアプリでの登録が必要です。
※GPS機能付加には専用nano-SIMを格納します。



徘徊初動感知時に保護できずに屋外へ徘徊してしまっても、専用WEBアプリ上で現在位置情報及び移動履歴による追跡や、メール通知機能等で徘徊行動を把握でき、早期発見に繋がります。

▶ 『お出かけアラートDX』のレンタル・お申し込みについて

- ① お住まい地域の「福祉用具貸与事業者」にご相談ください。
- ② ①の事業者でお取り扱いがない場合は、弊社にお問合せください。

▶ 詳細資料のダウンロード



◀ お出かけアラートDXのデモ動画

詳細資料 (徘徊見守りソリューション含む) ▶



QRコードから、弊社Googleドライブ内に保存されているデータを視聴・ダウンロードできます。
*QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

▶ 提供元

株式会社マモエル
東京都千代田区神田小川町3-2-10 三光ビル4F

✉ contact11@mamo-l.jp

☎ 03-6811-0532 (平日9:00~18:00)

*土日祝祭日及び年末年始・ゴールデンウィーク・お盆は休日。

*電話でお問合せの場合は、受付担当がお受けし、
別途担当者よりご連絡させていただきます。

<https://mamo-l.jp>

マモエル

