

足指の曲がりやを補整し外反母趾によるトラバブルを緩和する DSISソルボ外反母趾対策 ハーフインソールタイプ

外反母趾による足のトラバブルに、土ふまずをしっかりとサポートすることで、前足中央に集中していた衝撃を分散し、トラバブルをやわらげます。ソルボDSISの優れた衝撃吸収性はもちろん、耐久性にも優れ、長期間の使用が可能になりました。つま先がきつくならないハーフタイプ。

価 格	¥1,300 (税抜価格)	1ペア
カラー	ベージュ	
	2S (22.0~23.0cm)	61047
サイズ	S (23.5~24.5cm)	61048
	M (25.0~26.0cm)	61049




●使い方 人工皮革を上にして左右を確認し、かかと部をそろえて、土ふまずに突起している部分が合うように調整しながら前面テープで靴の中に固定します。あらかじめ、靴の土ふまず部にアーチパッドがある場合は、取り除いてお使いください。

足のトラバブルの回復補助に。医療分野で高い評価

DSISソルボメダイ フルインソールタイプ

足、膝、腰のトラバブルに、医療分野で高い評価をうけ、信頼を得ているフルインソールです。全面に衝撃吸収素材「ソルボ」を使い、3つのアーチサポートが足指の機能を高め、足のトラバブルの回復補助と再発を軽減するフルインソールです。

価 格	¥1,800 (税抜価格)	1ペア
カラー	グレー	
	3S (22.0~22.5cm)	61807
	2S (23.0~23.5cm)	61808
サイズ	S (24.0~24.5cm)	61809
	M (25.0~25.5cm)	61810
	L (26.0~26.5cm)	61811
	2L (27.0~27.5cm)	61812

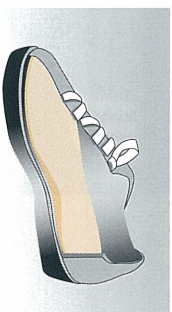

●使い方 布地を上にして左右を確認し、靴の中に敷き、インソールが靴より大きい場合は、先端部をハサミでカットしてください。靴にインソールが入っている場合は、取り除いてお使いください。


足のトラバブルを軽減し子供の足の健全な発育を応援する

DSISソルボキッズ フルインソールタイプ

成長期の子供の足にかかる負担を、衝撃吸収素材「ソルボ」と、3つのアーチサポート機能で軽減します。土ふまずのアーチをしっかり守り、かかとにかかる衝撃を分散するとともに、足指をしっかり使うことでスムーズな体重移動が行え、正しい歩行をサポートします。

- こんなお子さまに
 - 靴がすぐ変形する。
 - 歩くときの左右のバランスが良くない。
 - 歩くときの姿勢が悪い。
 - 夕方になると足が痛い訴える。

価 格	¥1,000 (税抜価格)	1ペア
カラー	グレー	
	15cm, 16cm, 17cm, 18cm, 19cm, 61076, 61509, 61510, 61511, 61512	
サイズ	20cm, 21cm, 22cm, 23cm 61513, 61514, 61515, 61516	

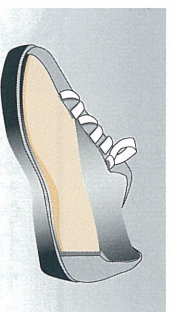

●使い方 布地を上にして左右を確認して靴の中に敷きます。インソールが靴より大きい場合は、先端部をハサミでカットしてお使いください。スリッパ時でもお使いいただけます。ゆとりのある靴にお使いください。

扁平足・外反母趾などの悩みに

DSISソルボアーチホルダー

ソルボDSISの特長である3つのアーチサポート機能をもつ3軸パッドを、足に直接着けるホルダータイプ。靴を選ばず、また家の中でも使用でき、足にかかる負担を軽減します。面ファスナーを採用しており、着脱が簡単な上に、自在に締めつけを調節出来ます。

価 格	¥2,800 (税抜価格)	片足入
カラー	ベージュ	
	2S (22.0~23.0cm) 左 63442, 右 63443	
サイズ	S (23.5~24.5cm) 左 63444, 右 63445	
	M (25.0~26.0cm) 左 63446, 右 63447	
	L (26.5~27.5cm) 左 63448, 右 63449	



●使い方 左右を確認して土ふまずに合うように調整しながら、面ファスナーで止めます。締めつけ過ぎないようご注意ください。

