


キャスパー ZAFU

取 扱 説 明 書


この度は株式会社アシスト製品 **キャスパーZAFU**（座布）をお買い上げいただき誠にありがとうございます
この取扱説明書では、お客様に正しくご使用いただくために必要な注意事項等を説明しておりますのでご使用前に
必ずお読みください ※保証書は大切に保管くださいますようお願いいたします

使用上の注意

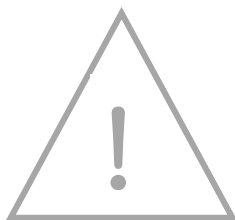


- 車いす使用者の姿勢の調整や姿勢保持以外の用途でご使用にならないでください
- ご利用者の身体に無理のかかる体位でのご使用はお止めください
- 車いすに装着する際には前後、左右を間違えないようご注意ください
- サイズの合わない車いすで使用しないでください
- 床ずれができていたりの方やできやすい方は、必ず医師や看護師、セラピスト(OT・PT)など専門職の方にご相談ください
- 火気のそばで使用したり、保管したりしないでください
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所には保管しないでください
- 長期間、クッションの上に重量物を置かないでください
- ZAFUを設置後、車いすに付属するベルト等の長さは必ず再調整してください
- 車いすに本書による固定方法以外での取り付け、ご使用はお止めください

梱包内容

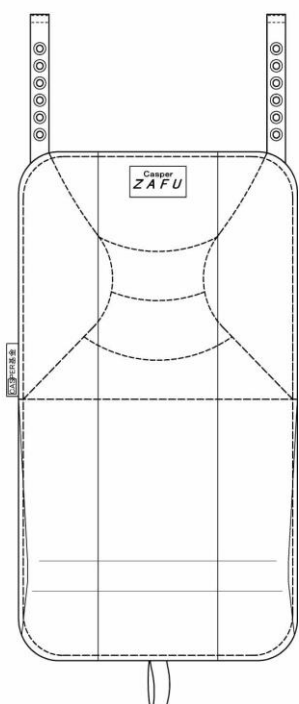


●ZAFU 本体

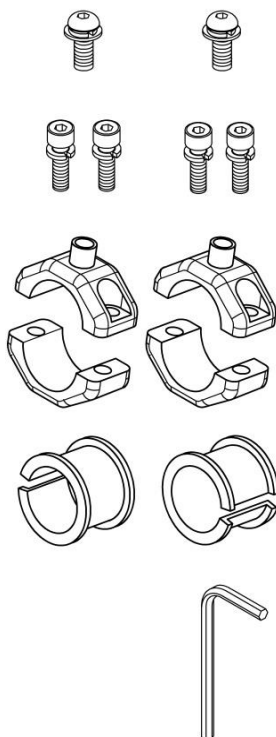


- M6六角穴付きボタンボルト × 2個
（ワッシャー付）
- M5六角穴付きボルト × 4個
（ワッシャー付）
- ブラケット金具上下セット × 2個
- 樹脂カラー × 2個
- 4mm六角棒レンチ × 1個

取り付け・設置方法

1 車いすの押し手パイプにブラケット金具を取り付けます

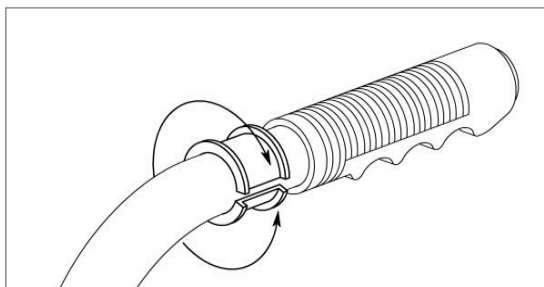

- ① 金具の取り付け位置を決め、パイプに樹脂カラーを取り付けます
- ② 樹脂カラーの上からブラケット金具を取り付けます




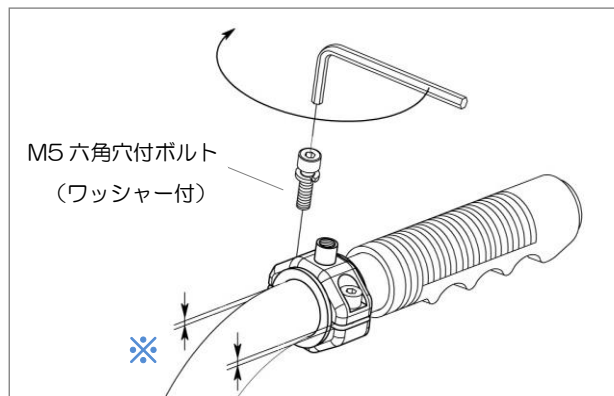


- ③ 専用の六角レンチで2本のねじを左右均等にしっかりと締め込んでください

※の隙間が同じになるように締め込みを調整してください

2 ZAFU 本体を車いすに取り付けます

- ① ZAFU の方向を確認の上、車いすのシート上に置いてください

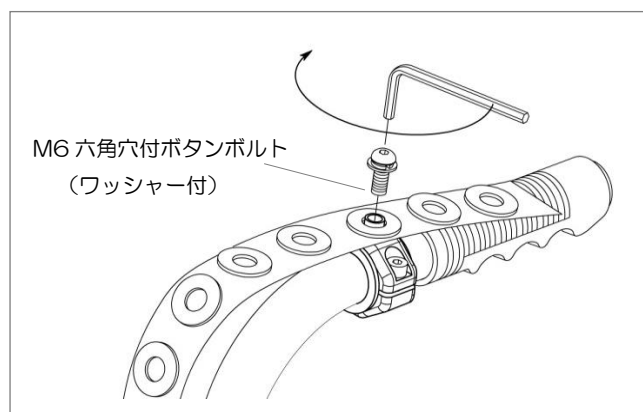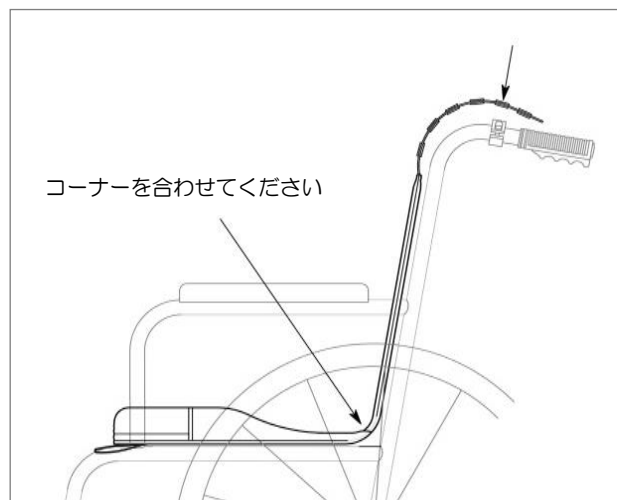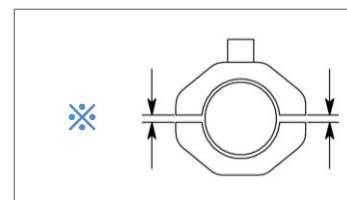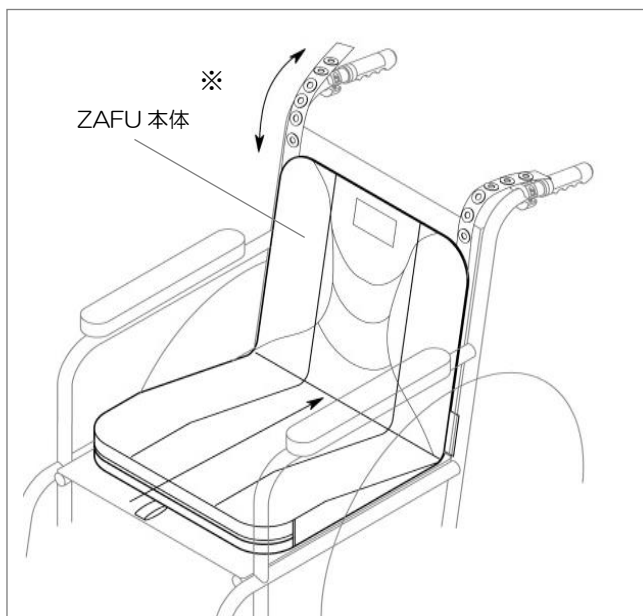


- ② 座面後部を一番奥にあて、背を車いすの背シートに沿わせませす


- ③ ※ベルトの長さで固定するハトメの穴の位置を決めます

- ④ ハトメ穴を通してブラケット金具にねじ固定します


- ⑤ 専用の六角棒レンチで締め込んでください
締め付けは十分に行ってください

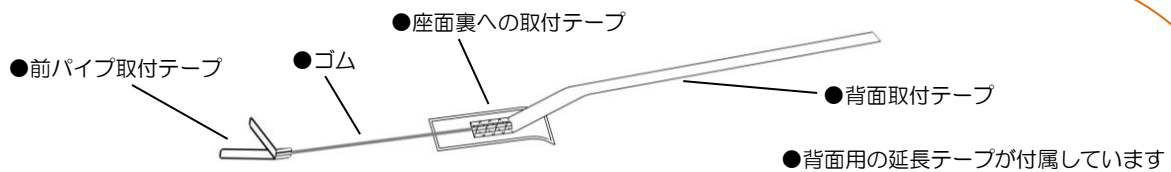


1

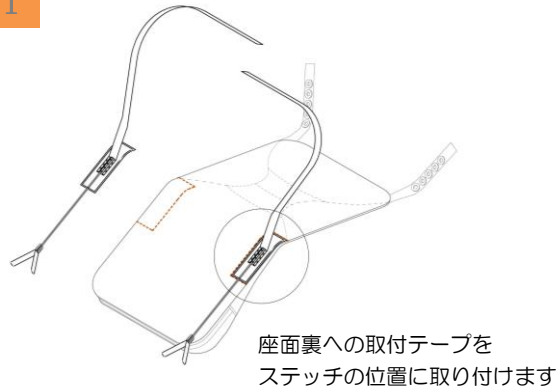

2

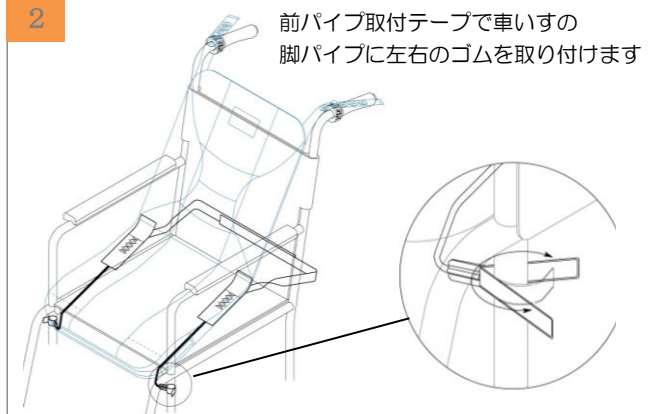


●側板の隙間からテープを通す場合

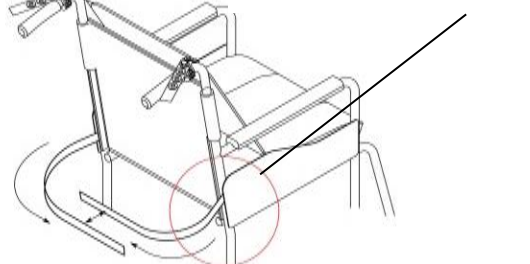



背面取付テープを車いすの背もたれに取り付けます

●肘かけの上からテープを通す場合


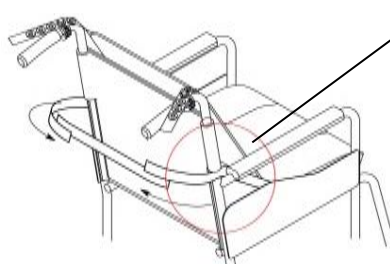


テープの長さが足りない場合は付属の延長テープを使用します

3

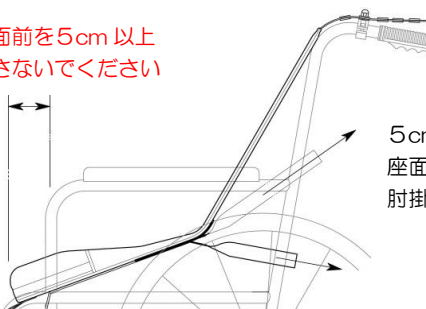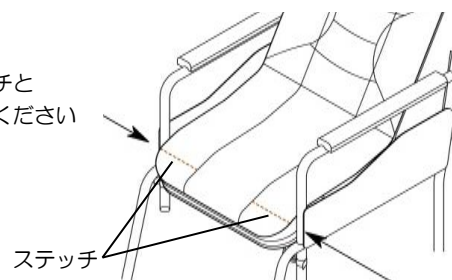座面前を5cm以上
出さないでください5cmの目安として
座面前部のオレンジのステッチと
肘掛パイプの位置を合わせてください座面の出し過ぎに注意してください 座面を前に出し過ぎると
着座時に座面からずり落ち、転倒する恐れがあります

1 ウェッジサポートとZAFUの取り付け

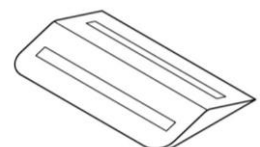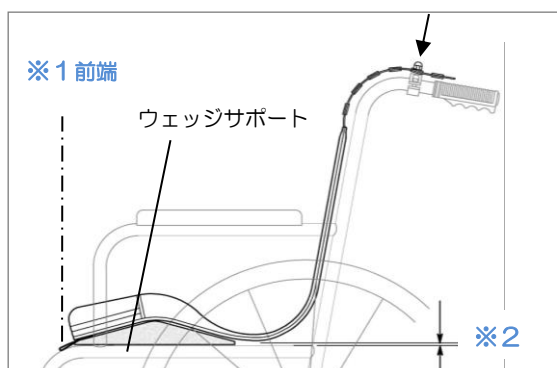

- ①ウェッジサポートの方向を確認の上、ZAFUの座面下、車いすの座シート上に置いてください
- ②ZAFUとウェッジサポートの※1 前端の位置を合わせます
- ③上から軽く押さえるとマジックテープによりZAFUと固定されます

必ずベルトの長さとはトメの穴位置を再調整してください

※2 ウェッジサポートを取り付けた状態で座面の後部が座シートに着く位置にしてください

仕様・寸法

- サイズ：Sサイズ / 車いす 40～41 cm幅用 座奥 34×座最厚部6／最薄部2cm
- ：Mサイズ / 車いす 42 cm幅以上用 座奥 38×座最厚部6／最薄部2cm



車いすの座幅が 40～41 cm の場合は S サイズ / 42 cm 以上の場合は M サイズ を選択ください

- 素材：カバー／ポリエステル 100%：ハトメ／ステンレス
- ：インナークッション／ウレタンフォーム（防水フィルム貼り）：固定金具／アルミ

《ウェッジサポート》

- サイズ：Sサイズ用 奥行 21×最厚部4cm
- ：Mサイズ用 奥行 25×最厚部4cm
- 素材：カバー／ポリエステル 100%
- ：インナークッション／ウレタンフォーム

《ZERO コード》

- サイズ：テープ 幅 2.5×50 cm
- ：ゴム 15 先端部 幅 1.5×7.5 cm
- 素材：テープ／ポリエステル 100%
- ：ゴム／天然ゴム・ナイロン


お手入れ方法

- カバーは洗濯機による洗濯が可能です。水温 30 度以下、弱流で洗濯してください
- 家庭用洗剤をご使用ください
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。色落ちの原因となります
- ドライクリーニングはしないでください
- 洗濯後は直射日光を避け、陰干しをしてください
- アイロンをかける場合は低温で必ずあて布を使用してください
- マジックテープが他の生地を傷める恐れがありますので洗濯ネットをご使用ください（ウェッジサポート・ZEROコード）



必ずインナークッションをカバーから取り出してください。クッションは洗濯できません

- ZAFU のインナークッションには防水フィルムを貼っておりますが、完全防水ではありません。水や液体のかからないようにしてください
- ウェッジサポートも同様にインナークッションをカバーから取り出してください
- クッションが汚れてしまった場合は、固く絞った布でたたくように清拭した後、必ず室内にてよく乾燥させてください
- クッションの汚れや、劣化がひどい場合は販売店までご相談ください

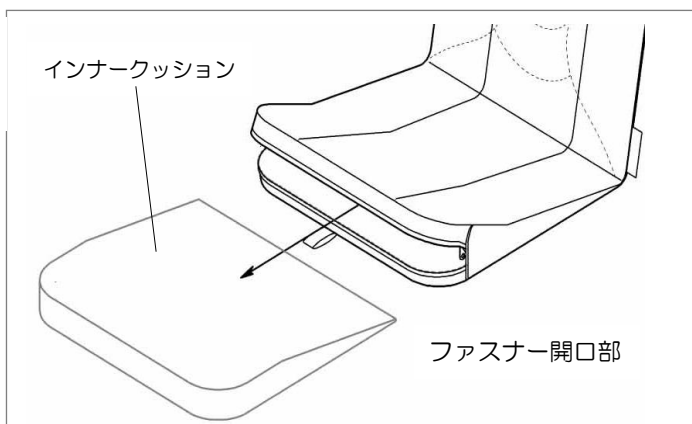

●製品の改善・改良のため、仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください

開発・製造元

株式会社 アシスト

<http://www.assist-info.jp/>

本社

〒586-0071
大阪府河内長野市加賀田 2649 番地

TEL 0721-60-2833
FAX 0721-60-2834

東京営業所

〒143-0013
東京都大田区大森南 4 丁目 6 番 15 号
テクノ FRONT 森ヶ崎 404 号室

TEL 03-5735-1555
FAX 03-5735-1556

販売店