

marubishi

携帯型多用途クッション

洗える！

パキユツとクッション

*Washable!
Pakyutto
Cushion*

軽い！
持ち運び便利！

収納ベルトで
バラバラにならない！

収納ベルト

カバーも
中材も洗える！

様々なタイプの
椅子に対応
可能！

シーンに合わせて置き方自由！

「坐骨サポート」
お尻が痛くなる時

「背筋サポート」
姿勢よく座りたい時

「アンカーサポート」
前ズレを防ぎたい時

「ランバーサポート」
腰の隙間を埋めたい時

「内転筋サポート」
脚を閉じて座りたい時

「背中サポート」
背中を安定させたい時

ズレない！どんな椅子でも固定できる！



面ファスナーの
オスになっている

ベルトで固定しよう！

クッションの裏面が、面ファスナーのメスになっているので、固定ベルトとクッションがくっつく仕組みです。さらに、ベルトが椅子と接する面は、滑り止めになっているので固定ベルトもズレにくいです。

白い点々は
滑り止め



※固定ベルトは別売りとなっております。



固定ベルトのみ

固定ベルト
+
収納ベルト

固定ベルトと収納ベルトを繋げて延長する事が可能です！この方法で、様々なタイプの椅子に対応可能となっています。

快適さの秘密

POINT


1

体圧分散

一般的な椅子に座ると坐骨結節部に圧力が集中します。

洗える！パキュッとクッションを置いて座ると、坐骨結節部の負担が軽減され、全体的に圧力が分散されていることが分かります。

洗える！パキュッとクッションの使用前後の体圧分散

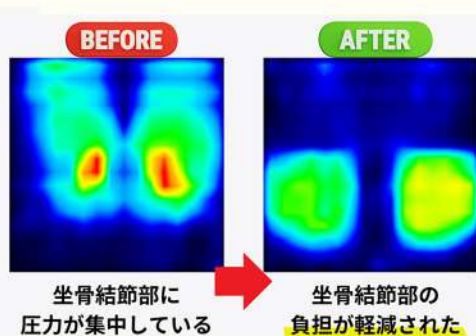

指で押すと適度な反発力があり、柔らかすぎず硬すぎない快適な座り心地。中材はビート板などにも使われる発泡ポリエチレンを使用しています。

POINT

2

傾斜

無理なく体を支える角度



クッションにこの傾斜をつけることで、自然と骨盤が立ち、背筋が伸び、正しい姿勢をサポートしてくれる。

カラー



【サイズ】 本体：縦15×横15×高さ4 (cm) / 1個

固定台座：幅 14×長さ30 (cm)

収納ベルト：幅 2.5×長さ50 (cm)

固定ベルト：幅 2.5×長さ117 (cm)

【重さ】 本体（面ファスナー/収納ベルト込み）：約91g

固定ベルト：約20g

【素材】 カバー：ポリエステル

中材：発泡ポリエチレン

固定台座：ポリエステル、ナイロン、アクリル樹脂

収納ベルト：ポリプロピレン、ナイロン

固定ベルト：ポリプロピレン、ナイロン、アクリル樹脂

【価格】 本体・固定台座・収納ベルト：4,950円（税込）

本体・固定台座・収納ベルト・固定ベルト：6,050円（税込）

固定ベルト：1,100円（税込）

 丸菱工業株式会社

〒485-8505 愛知県小牧市大字本庄1251番地3 0120-17-3210

kikaku@marubishi-industry.co.jp 受付時間/月～金曜日（祝・祭日除く）9:00～17:00

販売元