

NEW! 分体階段昇降機の特徴

- 1** クローラー部分（階段昇降駆動部）/ 車椅子 / 荷物用台車全てがコンパクトに折畳み可能で収納・搬送も楽々！




- 2** 操作パネルはシンプルで扱いやすく一目でわかる仕様！
速度調整や電池の残量確認も簡単に行えます。



- 3** 専用車椅子 / 専用台車は単体でも使用が可能！
場面や用途に合わせて幅広くご使用頂けます。



- 4** 連結はピンの抜き差しにより可能で簡単に着脱ができます！
ネジ等の締め付けは不要ですが安全面に考慮した設計です。

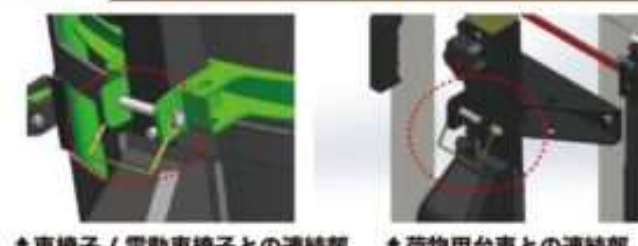

車椅子 / 台車の背面にある装着部にクローラー部分の軸部をはめ込み、ロックピンを差し込み固定するだけで連結ができます。簡単に着脱ができますが、安全面を重視して走行中に外れるようなことがない設計になっています。

連結寸法

車椅子使用時：全幅/639mm 長さ/1278mm（駆動部展開時）高さ/1032～1532mm
荷物用台車使用時：全幅/525mm 長さ/1114mm（駆動部展開時）高さ/1032～1532mm

クローラー部分の軸部のノッチ（くぼみ）が鉤爪のようになっていて、しっかりと車椅子 / 台車の装着部分に引っかかる仕組みです。連結ピンと合わせて連結状態をキープします。