



HK-201

初めてでも使いやすい
ミストタイプでやさしく洗い流す

鼻用洗浄器

クリーンリフレッシュ

コンパクト



ミストタイプだから
初めての方にも

3段階の噴霧量切替

シリコンヘッドで
鼻にやさしい

使い方


洗浄水を作る

精製水 200ml に対して
精製塩約1.8g を入れてよく混ぜる。




洗浄水をセット

洗浄水をタンクに入れ、タンク蓋を取り付ける。

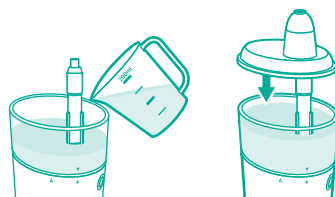

鼻腔を洗浄

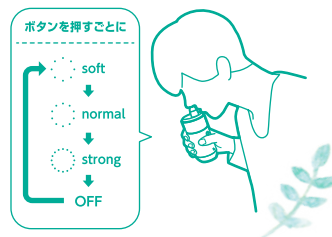

販売店 名称 番号
品名 一般医療機器
区分 11B2X10023000004
入力 DC5V 1A
内蔵電池 充電式リチウムイオン電池 3.7V 1400mAh

充電時間 約4時間 (空の状態から満充電まで)
寸法 約幅52×奥行63×高さ153mm
質量 約197g
流量 soft : 13±4ml/30秒
normal : 16±4ml/30秒
strong : 19±4ml/30秒
タンク容量 約45ml

使用環境温度 温度: 5~40℃
湿度: 30~90%RH 結露なきこと
輸送および保管環境温度 温度: -10~60℃
防水仕様 湿度: 30~90%RH 結露なきこと
動作回数 IPX7 ※1
付属品 満充電で約60回 ※2
ノズルヘッド2個
充電用ケーブル1本、洗浄用ブラシ1個

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※ 7才未満の子供には使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。
※1 IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。
※2 1回2分、normalモードでの使用の場合

製造販売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9



株式会社ドリテック
https://www.dretec.co.jp

東日本営業部
〒333-0811
埼玉県川口市戸塚2-11-8
TEL 048-299-5511
FAX 048-299-5544

大阪支店
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-11-10 第3中島ビル 8F D室
TEL 06-6755-9488
FAX 06-6755-9477

HPはこちら

