

シャワー温浴システム 浴用椅子設置タイプ




浴槽に入らなくても身体を温められる、新しい入浴方法をご提案します。



しっかり
温浴

●体を包み込むようなノズル配置と高さ調整機能で、しっかり温まります。

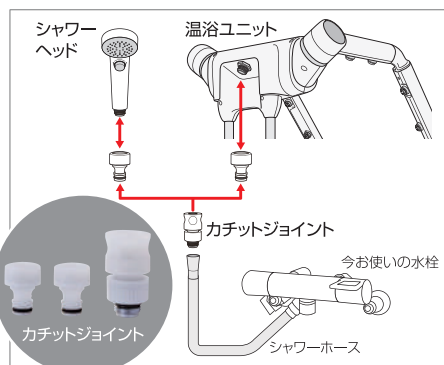

かんたん
設置

●工事が不要ですぐに使えます。



安心
安全


●浴槽をまたがないので、転倒リスクが減ります。

しっかり温浴

体を包み込むようなノズル配置のシャワーで広範囲に湯が当たり、しっかり温まります。

更に温まりたい方にはケープ併用で温浴効果を向上できます。

※【実験条件】42℃、5分間の入浴で比較

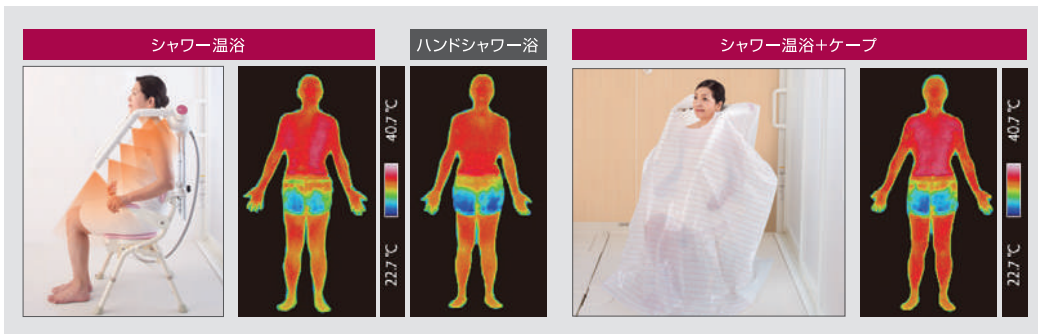

かんたん設置

今お使いの水栓のシャワーに、付属の「カチットジョイント」を取り付けるだけでお使いいただけます。

折りたたんで収納できるので場所を取りません。




安全・安心

座ったまま温まるので、介護する方も受ける方も無理な動作がありません。

浴槽を跨ぐのが大変な方も、座ったまま安全に入浴していただけます。

水圧がかからないので、体への負担が少ない入浴方法です。

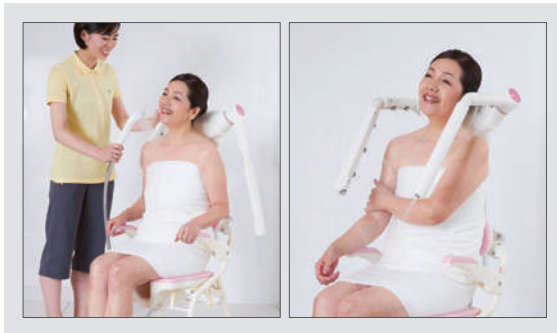


オプション

■マイクロバブルセット


SEKISUI × Science

ウルトラファインバブルが毛穴やシワの奥の汚れに吸着し汚れを優しく洗い流します。工事不要で簡単に取付けができます。

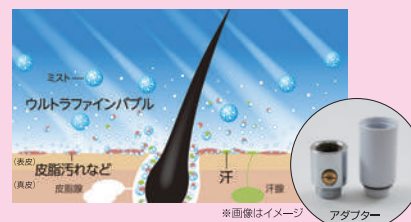

■切替弁タイプ


シャワーホースの着脱をせずに、温浴ユニット背面の切替弁でシャワーヘッドと温浴ユニットの吐水の切替ができます。

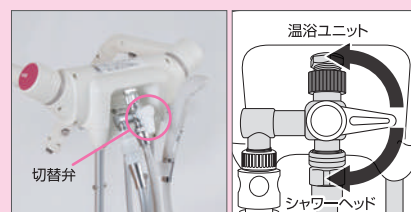

wellsシャワーシステム 仕様一覧

品名・品番	浴用イス設置タイプ(ケープ付)	HWS100
商品サイズ	使用時 幅46~48×奥行54~58(切替弁タイプ:57~61×高さ99~124cm 収納時 幅69×奥行35×高さ96~107cm	HWS110
最大使用者体重	100kg	
商品重量	約6kg(切替弁タイプ:7kg)	
材質	温浴ユニット 本体 ポリプロピレン樹脂、アルミニウム他 ノズル ポリアセタール樹脂、合成ゴム	
	浴用イス 本体 ポリエチレン樹脂、アルミニウム他 グリップ エラストマー樹脂 座面・背もたれパッド EVA樹脂 脚ゴム 合成ゴム	
	ケープ 本体 ポリエチレン樹脂	
	切替弁 本体 黄銅、ポリアセタール樹脂 フック ポリアセタール樹脂 シャワーヘッド 軟質塩化ビニール樹脂他	
	マイクロバブルセット アダプター2種 AS樹脂/黄銅他 シャワーホース 軟質塩化ビニール樹脂、黄銅	

シャワー温浴システム浴用イス設置タイプ(ケープ付)	定価118,800円(税込)
TAISコード 00599-000019 JANコード:4580507760028	
シャワー温浴システム浴用イス設置切替弁タイプ(ケープ付)	定価129,800円(税込)
TAISコード 00599-000020 JANコード:4580507760035	
[追加オプション] マイクロバブルセット SEKISUI×Science	オープン価格
品番 HWS120	

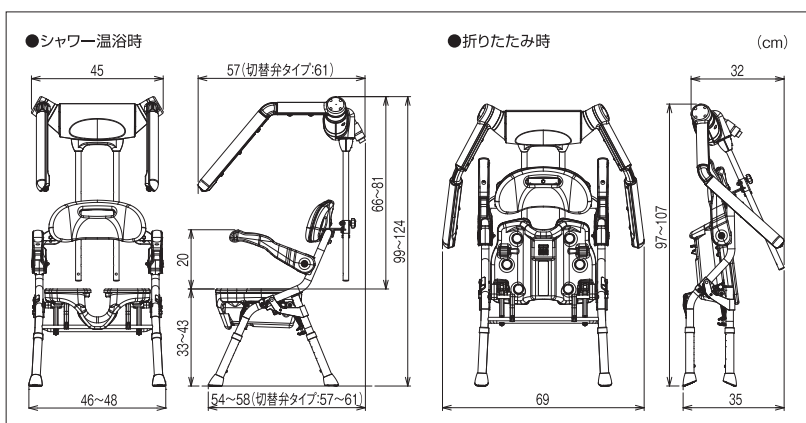

- 設置条件
- シャワー付きサーモ水栓金具であることをご確認ください。
 - 給湯器及び水栓金具は、42℃のお湯が毎分10リットル出ることをご確認ください。
 - 対応水栓メーカー: TOTO・LIXIL (INAX)・カクダイ・SANEI・KVK・MYM ※一部除く
 - 洗い場設置寸法: 1100×800mm以上(扉可動範囲除く)
- 想定使用者
- 10分以上、座位姿勢を保てる方。

※本リーフレットは印刷物のため、実際の商品の色柄と異なる場合があります。 ※商品の仕様・設備は予告なく変更する場合があります。 ※最新情報は当社ホームページで確認ください。 ※無断転載を禁じます。 ※掲載内容は2022年1月現在のものです。

積水ホームテクノ株式会社

本社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-4-30
(ニッセイ新大阪ビル 17 階)

wells ホームページ



お問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせ・ご相談は(土・日・祝日を除く)

0120-117-516

http://www.kaigoshien.com

資料 No.HCK1934
F-2022.01.5.000 第2版