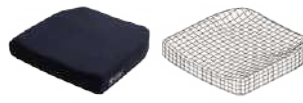
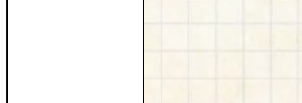
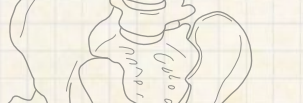


ハイクラス体圧分散を実現したスリムタイプ、
汎用性の高いフラットタイプ、
姿勢サポート力と体圧分散性効果の高いコンタータイプで
多くのお悩みを網羅的に解決します。

■タカノクッション MOLA（モーラ）

製品名	タカノクッションMOLA スリムタイプ	タカノクッションMOLA フラットタイプ			タカノクッションMOLA コンタータイプ		
							
希望小売価格	22,000 円 (20,000 円)	27,500円 (25,000円)			30,800円 (28,000円)		
品番	TC-ML40S	TC-ML38F	TC-ML40F	TC-ML43F	TC-ML38C	TC-ML40C	TC-ML43C
サイズ(mm)	W400×D400 H35 (坐骨部) H40 (大腿部)	W380×D400 H55 (坐骨部) H60 (大腿部)	W400×D400 H55 (坐骨部) H60 (大腿部)	W430×D400 H55 (坐骨部) H60 (大腿部)	W380×D400 H50 (坐骨部) H75 (大腿部)	W400×D400 H50 (坐骨部) H75 (大腿部)	W430×D400 H50 (坐骨部) H75 (大腿部)
製品重量(kg)	約0.8	約0.98			約1.10		
JANコード	4523725014368	4523725014160	4523725014184	4523725014207	4523725014153	4523725014177	4523725014191
TAISコード	00297-000126	00297-000123	00297-000121	00297-000125	00297-000122	00297-000120	00297-000124
オプション	アウターカバー	アウターカバー			アウターカバー		
品番	TCOC-ML40S	TCOC-ML38F	TCOC-ML40F	TCOC-ML43F	TCOC-ML38C	TCOC-ML40C	TCOC-ML43C
希望小売価格	8,800円 (8,000円)	8,800円 (8,000円)			8,800円 (8,000円)		
オプション	インナーカバー	インナーカバー			インナーカバー		
品番	TCIC-ML40S	TCIC-ML38F	TCIC-ML40F	TCIC-ML43F	TCIC-ML38C	TCIC-ML40C	TCIC-ML43C
希望小売価格	7,150円 (6,500円)	7,150円 (6,500円)			7,150円 (6,500円)		

●材質/ ウレタンフォーム・ラテックスフォーム（クッションMOLA）
ポリウレタン・ポリエステル（インナーカバー）/ ポリエステル・ポリウレタン・PVCレザー（アウターカバー）

モールドウレタンって何？



タカノ（株）下島工場

タカノの技術

モールドウレタンは、金型に原液を流し込み、一つ一つ発泡させる製法で製造したものです。密度が高くムラがでにくい製法で、自由度の高い成形が可能のため、複雑なデザインを作ることができます。



食パンと同じ！？

モールドウレタンは、スラブウレタンと異なり側面をカットしないため長時間使用しても型崩れしにくい特徴があります。



タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル

0120-825-845

受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<https://www.takano-hw.com>

E-mail:fukushi@takano-net.co.jp



タカノ
ハートワークス
WEB サイト


Rev.3.2025.10

仕様は予告なく変更することがあります。カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

お問い合わせ




MOLA
タカノクッションモーラ
製品カタログ

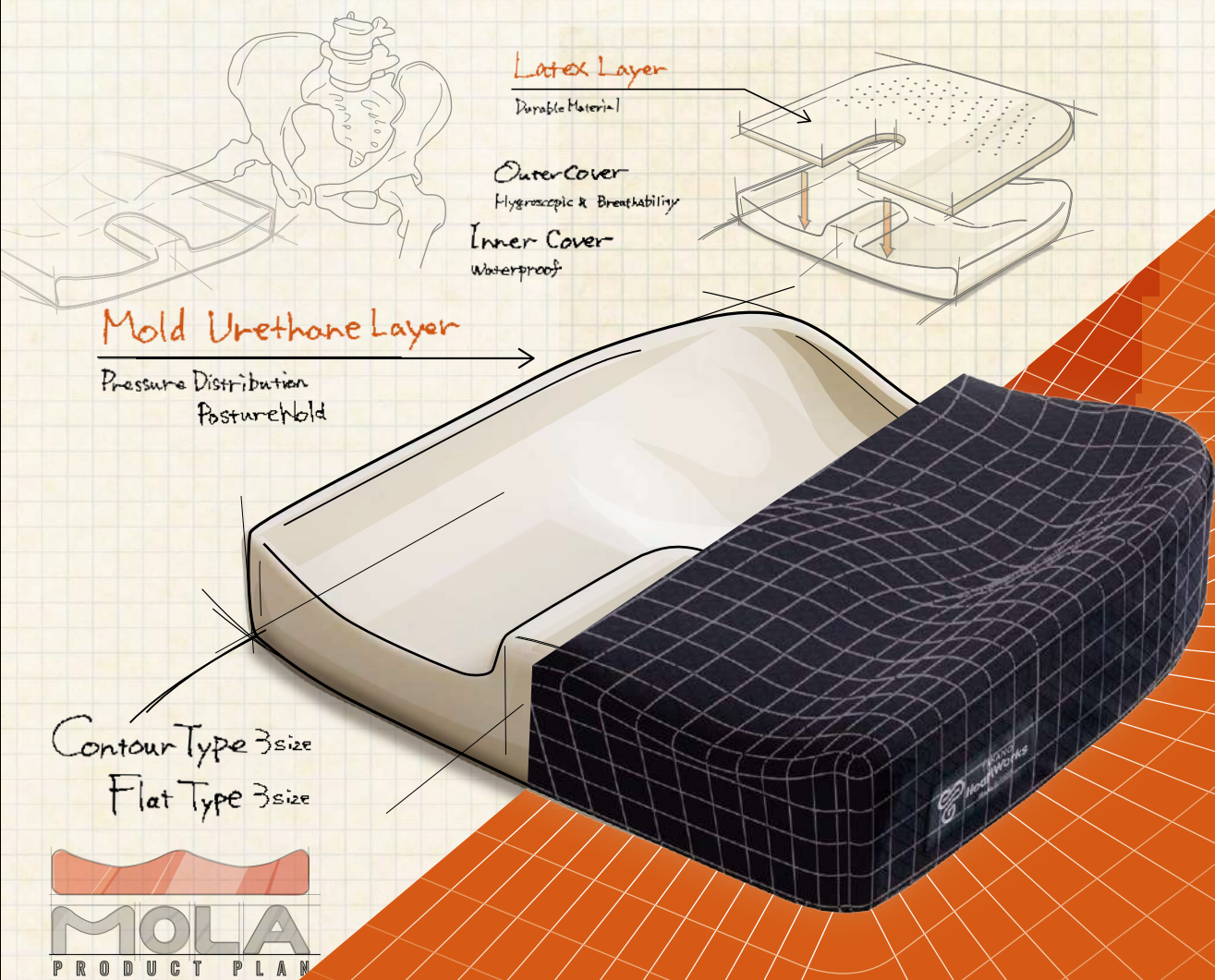

超快適設計。


Rev.
3

超快適設計。

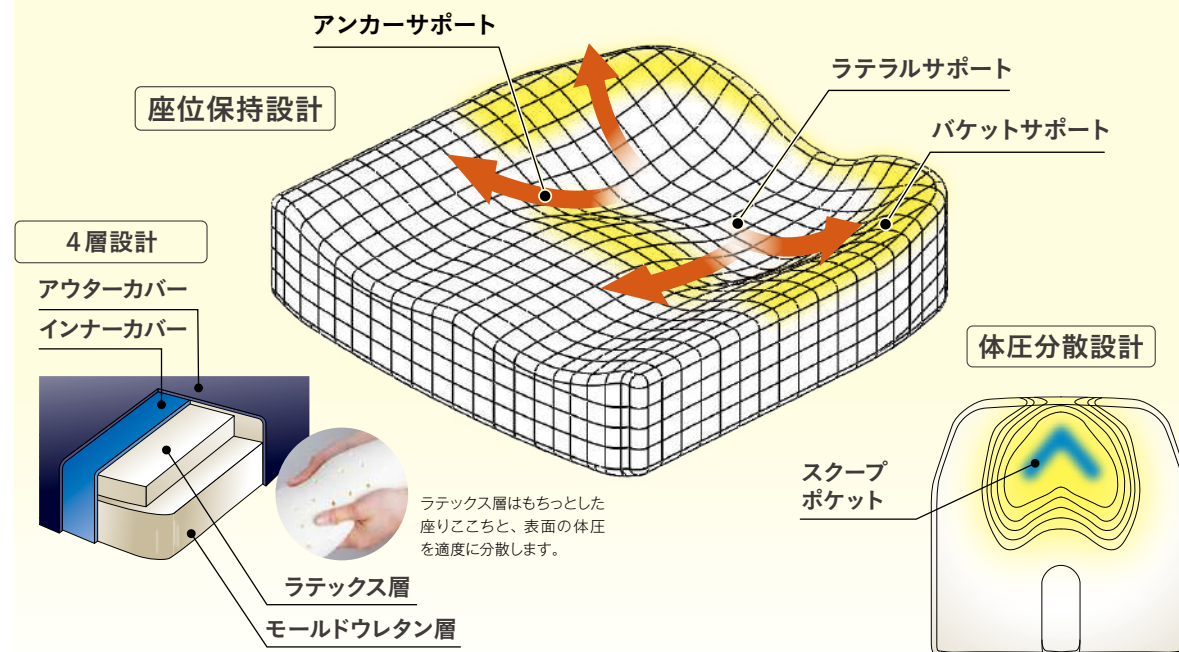

優れたサポート力（座位保持）

モールドウレタンのみ可以实现できる
滑らかな骨盤保持形状で
高いサポート力を発揮

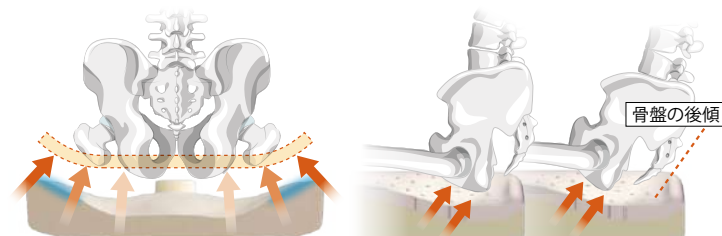

床ずれ好発部位の、尾骨部や坐骨結節部は体圧分散しながら、ラテラルサポートとバケットサポートにより座位を安定させます。

姿勢が安定しない方や、円背で骨盤が後傾した状態でもしっかりキャッチできるアンカーサポートとなっています。




最上位クラスの体圧分散性能

モールドウレタン+ラテックスフォームで
体圧分散性を長時間保持

モールドウレタンだから実現できた、滑らかな体圧分散設計により（スクープポケット）、尾骨部、坐骨結節部に集中する圧力を分散。着座後15分経過しても理想的な体圧分散効果を持続。一般的なジェル+ウレタンクッションでは不可能であったエアークッションクラスの効果を実現しました。

体圧分散効果の比較

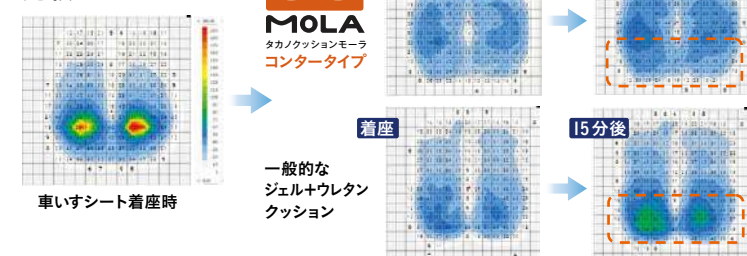

測定器：BodiTrak2Pro 座シートタイプ 被験者：160cm 50kg 女性

姿勢とクッション性にこだわった底面形状

全タイプ共通



クッションを「船底形状」にすることでスリングシートにフィットしやすくなり、クッションの性能を最大限発揮します。

スリムタイプのみ



尾骨部や坐骨結節部は除圧しながら、広い面積で支えることで高い体圧分散効果を実現




クッション裏面に10個のスリット加工を施し、大腿部裏への圧迫感を軽減



車いすと合わせやすい

様々な車いすに適合する形状を実現
最新の車いすにも合わせやすい

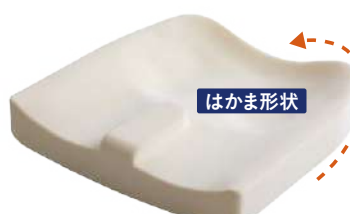


クッションのうしろ側が「はかま形状」になっており、より多くのバックシートにフィットし、最適なポジションでお座りいただけます。



耐久性が高い

約8万回の耐衝撃試験をクリア
5年使ってもへたりにくい！
（当社試験規格による）

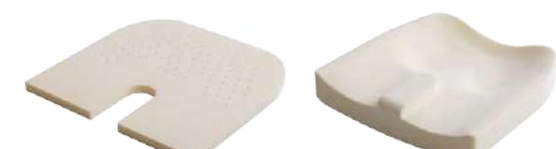

高反発・高耐久素材のラテックスは、特有の弾力性と復元力により、長時間使用しても型崩れしない耐久性があります。

一つ一つ金型で発泡する製法のモールドウレタンは、密度が高く、カット面が無いので型崩れが起きにくい耐久素材です。



タカノクッションMOLA 専用カバー

素材と機能にこだわり、
清潔にお使いいただける専用カバー



アウターカバーはシワになりにくく吸湿性のあるタカノオリジナル生地アクアフィットを採用、サラッと快適な使い心地です。



また裏面には強力な滑り止め生地を使用しているため、安心してご利用いただけます。



インナーカバーは防水、撥水生地を採用。アウトドア製品にも使われている高品質止水ファスナーが水の侵入を防ぎます。清拭で簡単お手入れ、薬品消毒OK！アウターカバーは洗濯可能！


ニーズを網羅する3タイプ

スリムタイプ



薄さに驚き、座り心地に感動

ハイクラス体圧分散を実現した薄型クッション。坐骨部の厚みが3.5cmと薄く、低床の車いすをご利用の方、薄型で合うクッションがない方にもオススメです。

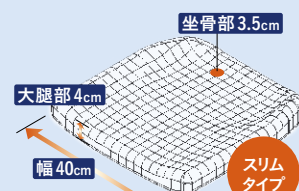


フラットタイプ



適度な沈み込みにより、心地よい安定感

コンタータイプより沈み込みが少なく、誰にでもなじみやすい安心の形状。5.5cmの薄型ながら、姿勢の安定と体圧分散をしっかりサポートするスタンダードタイプです。

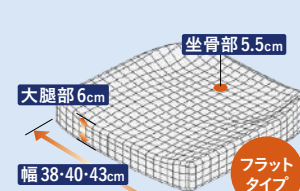

コンタータイプ



深く包みこんで、姿勢と快適さを両立

臀部がしっかり沈みこむ設計で骨盤を安定サポート。坐骨・尾骨まわりの圧力をやわらげ、高い体圧分散と姿勢保持力を両立したハイスベックモデル。

